

valeria+



Manual de usuario · v9.0 · con capturas de pantalla

Manual de Casos de Uso

**Aplicación de terapia auditivo-verbal y del lenguaje
para niñas y niños con hipoacusia, implante
coclear, dislalias, dislexia, TEA o dificultades del
lenguaje.**

Guía para logopedas, familias y cuidadores

Julio de 2026 · Documento interno

Expo SDK 54 / React Native · Castellano · Galego · Dominicano · Euskera · Voz neuronal offline

Índice

INTRODUCCIÓN

- 1** **Introducción a Valeria+**
- 2** **Roles y modos de acceso**
- 3** **Mapa de pantallas y glosario**

CASOS DE USO

- CU-01** **Alta de un nuevo paciente**
- CU-02** **Elegir un bloque de terapia (hub de bloques)**
- CU-03** **Academy: formarse con las Cápsulas de Conocimiento**
- CU-04** **Pares Mínimos para dislalias**
- CU-05** **Expansión Semántica: escenarios, categorías, progresión y contrastes**
- CU-06** **Prescribir terapias (Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia · Modo Profesional)**
- CU-07** **Retomar un paciente e iniciar sesión**
- CU-08** **Test de Ling previo (audífono / implante)**
- CU-09** **Realizar una sesión de ejercicios**
- CU-10** **Configurar recordatorios diarios (elegir franjas)**
- CU-11** **Motivación: racha, niveles e insignias**
- CU-12** **Consultar el panel de resultados**
- CU-13** **Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional**
- CU-14** **Exportar la evidencia de usabilidad del piloto (QR + compartir)**
- CU-15** **Elegir la variedad de terapia (Castellano · Galego · Dominicano · Euskera)**
- CU-16** **Panel del Adulto: carga comunicativa (ruido, doble tarea, quiebre)**
- CU-17** **Academy: aprender lo básico de Lengua de Signos Española**

ANEXOS

- A** **Preguntas frecuentes y resolución de problemas**
- B** **Historial de versiones**

Introducción a Valeria+

Valeria+ es una aplicación móvil (Expo SDK 54 / React Native) diseñada para acompañar las **sesiones de terapia auditivo-verbal y del lenguaje** de niñas y niños. Reúne en un solo lugar el registro del paciente, una comprobación auditiva previa (Test de Ling), seis bloques de terapia, un espacio de formación para el cuidador (Academy) y un panel de resultados para seguir la evolución.

La app parte de un principio clave: **los padres y cuidadores son el motor de voz y evaluación**. En los bloques con micrófono, el reconocimiento de voz ayuda, pero **el adulto siempre es el juez final**: puede corregir el veredicto con un toque. Y donde no hay micrófono (Expo Go, navegador web), el adulto valora la respuesta con botones. Así la terapia funciona en cualquier dispositivo y refuerza el vínculo familiar.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Logopedas y profesionales de audición/lenguaje (que prescriben y supervisan) y familias o cuidadores (que realizan las sesiones en casa). Este manual cubre a ambos perfiles.

Los seis bloques de terapia

Desde la pantalla **Prescripción de Terapias** se elige uno de estos bloques. Cada uno responde a un perfil clínico distinto, pero todos comparten la misma lógica: el adulto guía la sesión y tiene la última palabra.

Bloque	Para qué sirve
 Pares Mínimos	Dislalias fonológicas. 15 pares de palabras casi iguales (rana/lana) en 6 grupos —rotacismo, sigmatismo, velares, labiodental, nasales y laterales— con juego de voz, misión física y sello doble padre-hijo.
 Expansión Semántica	Progresión léxica para intervención temprana: 5 escenarios diarios, 9 progresiones (onomatopeya → adjetivo) y 8 cápsulas de contraste , uniendo imagen, voz y acción física.
 Audición — 18 terapias	Protocolo ACOPROS: fonética-fonología, semántica, morfosintaxis, pragmática y escucha en ruido (RA-1...RA-5) para pacientes con audífono, implante coclear o hipoacusia.
 Lenguaje — 7 terapias	Protocolo familiar: atención conjunta, imitación, comprensión, expresión, comunicación funcional, regulación conductual e interacción social.
 TEA — 6 terapias	Protocolo PRT + TCC para el espectro autista: atención conjunta triangulada, quiebre pragmático (con consentimiento), espejo asimétrico, transición interrumpida, categorización bajo ruido y múltiples señales. Todos los estresores son manuales (Panel del Adulto).

 Dislexia — 6 terapias	Fonología y acceso léxico: intruso fonológico, rastreo léxico con interferencia, síntesis fonémica rítmica, criba de pseudopalabras, rastreo visual de rotaciones (b/d · p/q) y denominación rápida (RAN).
--	--

Además, el **Test de Ling** es una comprobación auditiva rápida (6 sonidos) previa a los ejercicios de audición; **Academy** forma al cuidador (ver CU-03), y la **gamificación** (XP, racha, niveles e insignias) mantiene la motivación en todos los bloques.

Cómo son las sesiones

Todos los bloques comparten una misma mecánica de sesión, diseñada para que el niño no se canse y para que el adulto mantenga el control en cada paso.

Elemento	Qué aporta
 Flujo PASO 1 → 4	Cada mini-juego avanza por cuatro pasos visibles — consigna → juego → movimiento → evaluación —. En Pares Mínimos y Expansión Semántica una barra de fase de turno (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) marca en todo momento en qué punto va el ensayo, con doble vuelta evaluada (objetivo + opuesta).
 Rondas variadas	El botón “  Otra ronda ” rota hasta 3 contenidos distintos por ejercicio para que el niño no memorice siempre el mismo ítem.
 Sesión completa	Un botón por bloque encadena todos los ejercicios prescritos en una sola tanda (pasando por el Test de Ling si procede), en vez de lanzarlos de uno en uno.
 Frases portadoras	En Pares Mínimos la palabra objetivo se incrusta en una frase con entonación natural seguida de una pregunta, en vez de dictarse aislada diez veces seguidas.
 Voz humana	El motor prioriza voces neuronales/enhanced (Google neural/WaveNet, iOS Enhanced/Siri) y descarta las metálicas, con prosodia natural (pausas por frase, entonación en preguntas y exclamaciones) y frases de ánimo rotativas.
 Fichas siempre visibles	Pictogramas SVG de alto contraste para las palabras cuyos emojis se ven como cuadros vacíos o de bajo contraste en muchos Android, con emoji de reserva.

Cuatro variedades de habla con voz neuronal offline

El contenido terapéutico —lo que se locuta, se muestra y se evalúa— puede trabajarse en **cuatro variedades**; la **interfaz** (menús y botones) permanece siempre en castellano. Castellano, gallego y euskera usan **voces neuronales pregeneradas empaquetadas en la app**, de modo que la locución suena natural y funciona sin conexión (ver CU-15). La elección se guarda en el dispositivo y se aplica a todos los bloques.

Variedad	Voz y particularidades
 Castellano	Voz neuronal Sharvard (offline) y reconocimiento del sistema en español de España.
Galego (Proxecto Nós)	Voz neuronal Celtia , con banco de pares propio. El contenido compartido con el castellano recae con suavidad en la voz neuronal castellana mientras Celtia no lo cubra.
 Dominicano (Quisqueya Habla)	Voz latina del dispositivo y micrófono en es-DO. Respeto dialectal: no marca como error el seseo, la aspiración de la “s” ni el cambio de “r/l” a final de sílaba.
Euskera (batua · ILENIA/NEL-GAITU)	Voz neuronal HiTZ-TTS (UPV/EHU · Aholab). El reconocimiento usa eu-ES y, donde no exista, recae en es-ES con un pliegue de la ⟨h⟩ muda.

Academy: formación del cuidador

En la terapia auditivo-verbal el adulto es el motor de cada sesión, así que aprender a acompañar forma parte del tratamiento. **Academy** es un espacio de formación **para el adulto, no para el niño**, organizado en **cinco dominios** (Lenguaje, Hipoacusia, Dislalias, Dislexia y TEA). Cada dominio ofrece **Cápsulas de Conocimiento** de unos dos minutos —cómo aprenden a hablar los niños, el porqué del movimiento (TPR), los vicios a evitar, el manejo de los dispositivos auditivos...— que terminan con un **quiz** de respuesta explicada, y lleva su propia escala de **niveles e insignias**. Un **feed de prioridad** destaca arriba el dominio que corresponde a la patología de la ficha, para empezar por lo que más sirve (ver CU-03).

Motivación y constancia

Al estilo de apps como Duolingo, Valeria+ premia la práctica sostenida en **todos los bloques** con **XP, racha (🔥)**, **niveles** (de Osezno a Oso Legendario) e **insignias**. El progreso se guarda localmente y se refleja al instante al terminar cada sesión, sin re-dibujar el resto de la pantalla (ver CU-11).

Herramientas para el piloto clínico

Para la validación con profesionales, la app suma un conjunto de instrumentos que **no interfieren con la sesión** (no bloquean animaciones ni audio) y que respetan siempre el principio de que **el adulto es quien decide**.

Herramienta	Qué aporta
 Panel del Adulto · Carga comunicativa	Tres módulos manuales dentro del ejercicio —escucha en ruido (slider), oso distractor de doble tarea y quiebre pragmático—. La app nunca los activa ni ajusta sola (muro MDR; ver CU-16).
 Telemetría de usabilidad	Mide de forma anónima el tiempo por pantalla, los toques fuera de zona útil (misclicks) y la proporción de cápsulas de movimiento saltadas. Sin nombres, sin audio y sin el contenido de las respuestas.

 Encuesta rápida (SUS)	Una única pregunta de satisfacción (1–5 con caritas) sobre lo fácil que fue integrar el ejercicio en la rutina. Aparece solo tras completar cuatro bloques distintos y como mucho una vez por semana.
 Exportación dual	Con el PIN profesional, genera a la vez un código QR con el resumen (offline) y abre el menú de compartir con el registro completo; los datos se guardan cifrados y se purgan tras una exportación correcta (ver CU-14).

Privacidad y funcionamiento sin conexión

Valeria+ es **plenamente funcional sin conexión**: toda la información del paciente (ficha, historial, evolución por fonema, progreso y avance de Academy) se guarda **cifrada en el dispositivo**, conforme a RGPD/HIPAA. Para pruebas con profesionales existe una **sincronización en la nube opcional y aditiva** (acceso con correo y contraseña); si no se activa, todo permanece únicamente en el dispositivo. El capítulo 2 detalla los roles, el PIN y la privacidad.

Roles y modos de acceso

Valeria+ distingue dos formas de usar la app sobre el mismo dispositivo. El cambio no requiere cerrar sesión: se controla con un **PIN de 4 dígitos** del logopeda, compartido por todos los bloques.

Modo	Quién	Qué puede hacer
Modo Familia por defecto	Tutor, madre, padre o cuidador	Practicar lo prescrito, realizar las sesiones, activar recordatorios y consultar el progreso. No puede cambiar qué terapias, pares o actividades están activos.
Modo Profesional requiere PIN	Logopeda / profesional	Todo lo anterior más prescribir: activar o desactivar terapias en cada uno de los bloques prescribibles y guardar la selección. Se desbloquea con el PIN y se vuelve a bloquear al guardar.

PIN DE DEMOSTRACIÓN

El PIN de ejemplo es **1985**. En un despliegue real, el logopeda debe sustituirlo por uno propio. El PIN nunca se guarda en texto plano: se valida contra un hash SHA-256 (compatible con Hermes en Android).

Privacidad de los datos

Toda la información del paciente (ficha, historial de sesiones, evolución por fonema, progreso) se guarda **localmente en el dispositivo** mediante almacenamiento cifrado. La app está pensada para cumplir RGPD/HIPAA en el manejo de datos personales (PII). **Sin conexión, la app es plenamente funcional**: no necesita ningún servidor para operar.

SINCRONIZACIÓN EN LA NUBE (OPCIONAL)

Para pruebas con profesionales, la app ofrece un **acceso profesional con correo y contraseña** (Firebase Authentication) que permite guardar una copia de pacientes y sesiones en la nube (Cloud Firestore). Es una capa **aditiva y opcional**: cada profesional autenticado solo accede a sus propios datos, protegidos por reglas de seguridad. Si no se activa, todo sigue guardándose únicamente en el dispositivo.

TELEMETRÍA DE USABILIDAD DEL PILOTO

Durante el piloto, la app recoge métricas de usabilidad **anónimas** (tiempo por pantalla, toques fuera de zona útil y cápsulas de movimiento saltadas) y una encuesta breve de satisfacción. **No incluyen nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas**; se guardan cifradas en el dispositivo bajo un identificador de sesión y se purgan tras exportarlas (ver CU-14). Al tratarse de un estudio con menores, el **consentimiento informado** de las familias se gestiona en el protocolo del piloto, fuera de la app.

CAPÍTULO 3

Mapa de pantallas y glosario

Tras el alta o la selección del paciente se llega al **hub de Prescripción**, desde donde se abre cualquiera de los seis bloques (o Academy). El Test de Ling solo precede a los ejercicios de audición cuando el paciente usa audífono o implante coclear.



* Los ejercicios de Audición pasan antes por el Test de Ling si la patología indica audífono o implante.

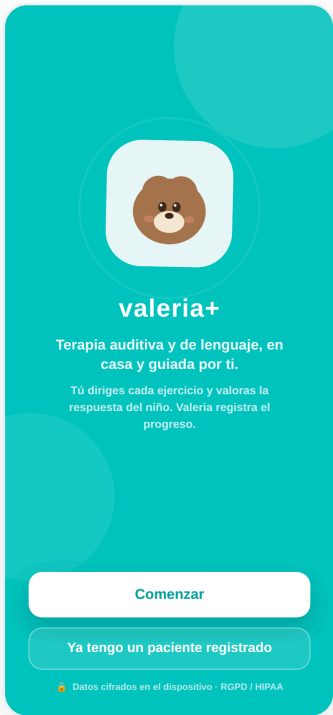


Fig. 1 · Bienvenida: “Comenzar” o “Ya tengo un paciente registrado”.



Fig. 2 · Créditos del proyecto y colaboradores.



Fig. 3 · Hub de Prescripción: los bloques de terapia y la tarjeta Academy.

Glosario

Término	Significado
Hub de bloques	Pantalla “Prescripción de Terapias”: seis tarjetas (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia) más la tarjeta Academy, desde donde se practica o prescribe.
Par mínimo	Dos palabras que solo se distinguen por un fonema (rana / lana). Sirven para entrenar el contraste que el niño sustituye.
Sustitución	Error fonológico habitual: el niño dice la palabra contraria ($\bar{r} \rightarrow l$). La app la detecta y la corrige.

Sello doble	Mecánica anti-pasividad: padre e hijo pulsan dos huellas a la vez para avanzar (o mantienen una pulsada 2 s).
TPR	<i>Total Physical Response</i> : aprender una palabra asociándola a una acción física del cuerpo.
Fase de turno	Barra guía de Pares Mínimos y Expansión Semántica que marca en qué momento va el ejercicio: Escucha → Repite → Veredicto → Misión.
Sesión completa	Botón que encadena en una sola sesión todos los ejercicios prescritos de un bloque, en vez de lanzarlos de uno en uno.
Otra ronda	Botón que rota el contenido de un mini-juego de Audición/Lenguaje (hasta 3 variantes) para que no se memorice el mismo ítem.
Progresión léxica	Secuencia que sube de onomatopeya → sustantivo → verbo → adjetivo sobre un mismo tema (el coche, el perro...).
Test de Ling	Comprobación de 6 sonidos (m, u, a, i, sh, s) que verifica si el niño oye desde graves hasta agudos.
Escala EPT-3	Valoración unificada de 3 niveles: ★ Emergente · ★★ En proceso · ★★★ Consolidado.
Racha (🔥)	Días consecutivos en los que se ha completado al menos una sesión.
NHC	Número de Historia Clínica del paciente.
Telemetría de usabilidad	Métricas anónimas que la app recoge durante el piloto para medir lo fácil que resulta de usar (tiempo por pantalla, misclicks, abandono de cápsulas). Sin datos personales.
Misclick	Toque en una zona “muerta” de la pantalla, fuera de cualquier botón o elemento útil. Un exceso señala que algo no se entiende o el objetivo es pequeño.
Abandono TPR	Proporción de cápsulas de movimiento (TPR) que se saltan en vez de completarse. Ayuda a saber si las pausas activas encajan en la sesión.
SUS (encuesta)	<i>System Usability Scale</i> adaptada: una pregunta de 1 a 5 sobre la facilidad de uso real. Aparece con moderación (hito de 4 bloques distintos y máx. 1 vez/semana).
Exportación dual	Salida del piloto en dos formatos a la vez: un QR con el resumen (offline) y el menú de compartir con el registro completo (online). Requiere el PIN profesional.
Variedad	Lengua o forma del habla en que la app locuta y evalúa el contenido: Castellano, Galego (Proyecto Nós), Dominicano (es-DO, Quisqueya Habla) o Euskera (batua, proyecto ILENIA/NEL-GAITU). Se elige en “Voz de la app”.

Voz neuronal	Locución pregenerada con modelos de voz de alta calidad (Sharvard en castellano, Celtia en gallego, HiTZ-TTS en euskera) empaquetada en la app; suena natural y funciona sin conexión.
Pliegue vasco	Ajuste que ignora la ⟨h⟩ muda del euskera al comparar la voz del niño con la esperada, para que el reconocimiento no la penalice. No afecta a las sibilantes ni africadas, que son contraste clínico y valora el adulto.
TEA	Trastorno del Espectro Autista. Bloque de 6 terapias (PRT + TCC) centrado en atención conjunta, reparación comunicativa, flexibilidad y regulación, con estresores siempre manuales.
Dislexia	Bloque de 6 terapias de conciencia fonológica y acceso léxico (intruso fonológico, síntesis fonémica, pseudopalabras, rotaciones b/d·p/q y denominación rápida).
RAN	<i>Rapid Automatized Naming</i> (denominación rápida): nombrar en voz alta una serie de dibujos en orden de lectura. El ritmo lo marca la mano del adulto, nunca un cronómetro.
Escucha en ruido	Categoría de Audición (RA-1...RA-5) que entrena la comprensión con ruido de fondo. El adulto sube o baja el ruido a mano con el deslizador del Panel del Adulto.
Rasgo dialectal	Característica normal del habla de una región (p. ej. el seseo dominicano). No es un error clínico y la app no lo penaliza.
Frase portadora	Frase natural en la que se incrusta la palabra objetivo ("El oso encontró una rana...") para practicarla con entonación real en vez de aislada.
Carga comunicativa	Conjunto de retos que el <i>adulto</i> activa a mano en su panel: ruido de fondo, distractor visual y quiebre de la comunicación. Nunca los activa la app sola.
Quiebre pragmático	Tarea en la que el adulto rompe la comunicación a propósito (murmura o pide algo absurdo) para observar cómo el niño la repara .

CASOS DE USO

Guía paso a paso

Cada caso de uso describe una tarea completa e incluye **capturas reales de la app**. Los iconos

Profesional y **Familia** indican el actor principal.

CU-01 · Profesional / Familia

Alta de un nuevo paciente

ACTOR

Logopeda o tutor que crea la ficha

PRECONDICIÓN

App instalada y abierta

PANTALLA

Bienvenida → Créditos → Ficha de Registro

RESULTADO

Ficha guardada y cifrada en el dispositivo

Flujo principal


1. En la pantalla de **Bienvenida**, pulsar “**Comenzar**” y avanzar por Créditos.
2. En la **Ficha de Registro**, rellenar los datos del **Niño/a**: nombre y apellidos (*obligatorio*), fecha de nacimiento, **NHC** (*obligatorio*) y género.
3. Completar el bloque **Tutor / Cuidador**: nombre (*obligatorio*), vínculo familiar, **correo** (*obligatorio y con formato válido*) y teléfono/WhatsApp para los reportes.
4. Completar **Diagnóstico y equipo médico**: patología, médico prescriptor y logopeda asignado.
5. Pulsar “**Guardar ficha**”. Aparece la confirmación “Ficha guardada y cifrada”.
6. Pulsar “**Continuar a Prescripción** →” para pasar al hub de bloques.

Flujos alternativos

- **Falta un campo obligatorio o el correo es inválido**: el campo se resalta en rojo y no se guarda hasta corregirlo.
- **La patología indica audífono o implante coclear**: se recordará para lanzar el Test de Ling antes de los ejercicios de audición (ver CU-08).

DATO CLAVE

La patología determina el circuito de la sesión (p. ej. una dislalia orienta hacia Pares Mínimos; un implante, hacia el Test de Ling). Elíjala con cuidado.

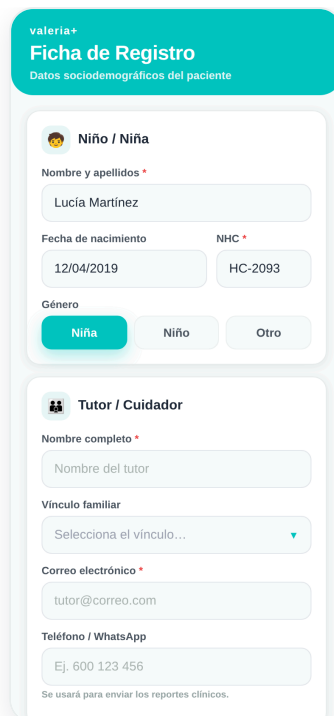

valeria+
Ficha de Registro
Datos sociodemográficos del paciente

Niño / Niña

Nombre y apellidos *
Lucía Martínez

Fecha de nacimiento
12/04/2019

NHC *
HC-2093

Género
☒ Niña
 ☐ Niño
 ☐ Otro

Tutor / Cuidador

Nombre completo *
Nombre del tutor


Vínculo familiar
Selecciona el vínculo...

Correo electrónico *
tutor@correo.com

Teléfono / WhatsApp
Ej. 600 123 456

Se usará para enviar los reportes clínicos.

Fig. 4 · Ficha de Registro: datos del niño/a (nombre, fecha, NHC y género).

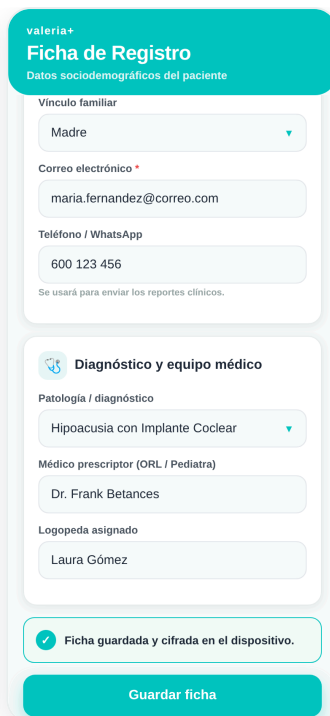

valeria+
Ficha de Registro
Datos sociodemográficos del paciente

Vínculo familiar
Madre

Correo electrónico *
maria.fernandez@correo.com

Teléfono / WhatsApp
600 123 456

Se usará para enviar los reportes clínicos.

Diagnóstico y equipo médico

Patología / diagnóstico
Hipoacusia con Implante Coclear

Médico prescriptor (ORL / Pediatra)
Dr. Frank Betances

Logopeda asignado
Laura Gómez

☒ Ficha guardada y cifrada en el dispositivo.

Guardar ficha

Fig. 5 · Ficha guardada y cifrada; aparece “Continuar a Prescripción →”.

CU-02 · Profesional / Familia

Elegir un bloque de terapia (hub de bloques)

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Ficha del paciente activa

PANTALLA

Prescripción de Terapias (hub)

RESULTADO

Bloque de terapia abierto para practicar o prescribir

El hub es el **centro de mando** de cada sesión. Muestra la racha 🔥 y el nivel 🏆 del paciente y presenta los seis bloques como tarjetas. Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia indican además cuántas terapias hay activas.

Flujo principal

1. Tocar la tarjeta del bloque deseado: **Pares Mínimos** (CU-04), **Expansión Semántica** (CU-05), **Audición, Lenguaje, TEA o Dislexia** (CU-06 / CU-09).
2. Antes de la primera sesión, abrir la tarjeta destacada “**Academy**” para **formarse como cuidador** (ver CU-03): en la terapia auditivo-verbal el adulto dirige la sesión, así que conviene empezar por ahí.
3. Desde la misma pantalla se activan los **recordatorios de sesión** (ver CU-10).

EMPIEZA POR ACADEMY

La tarjeta **Academy** (CU-03) comparte jerarquía visual con los bloques de terapia y no depende de nada previo: es el primer paso recomendado para que el adulto acompañe con criterio.

DÓNDE PRACTICA CADA QUIÉN

En Modo Familia todos los bloques son accesibles para practicar lo prescrito; solo el logopeda, con el PIN, cambia qué está activo en cada uno.

CU-03 · Familia

Academy: formarse con las Cápsulas de Conocimiento

ACTOR

Adulto que dirige la sesión (familia o cuidador)

PANTALLA

Prescripción de Terapias → Academy (hub de dominios)

PRECONDICIÓN

Ninguna; disponible desde el primer día

RESULTADO

Cápsula completada y progreso guardado en su dominio

Academy es el espacio de **formación para el adulto**. En la terapia auditivo-verbal la persona que acompaña al niño es el **motor de la sesión**, así que Academy le enseña —en pequeñas dosis— a hacerlo mejor. No es un curso único: se organiza en **cinco dominios de formación**, cada uno con su propia lista de cápsulas, su **escala de niveles** (de Novato a “Experto en...”) y sus insignias. Un **feed de prioridad** destaca arriba el dominio que corresponde a la **patología de la ficha** del paciente, para que el cuidador empiece por lo que más le sirve.

Dominio	Qué se aprende
 Lenguaje	Cómo aprenden a hablar los niños (el baño de lenguaje y la conversación por turnos), el porqué del movimiento (TPR) y los vicios a evitar: remodelar en vez de corregir y comentar más que preguntar .
 Hipoacusia / Sordera	Qué es la sordera y su abordaje, más micro-guías de hardware para el manejo y cuidado del audífono , el implante coclear y los dispositivos osteointegrados .
 Dislalias	Puntos de articulación de cada sonido, a qué edad se espera cada uno y cómo practicar en casa los sonidos difíciles (la erre, las praxias de la boca).
 Dislexia	Conciencia fonológica y apoyo a la lectura emergente: cómo suena y se segmenta cada palabra antes de leerla.
 TEA	Comunicación, anticipación y regulación en el espectro autista: cómo sostener la atención conjunta y reparar la comunicación sin presión.

Flujo principal

1. En **Prescripción de Terapias**, pulsar la tarjeta **“Academy”** (bajo el rótulo “Tu formación”).
2. El **feed de prioridad** propone el dominio que encaja con la patología de la ficha; también se puede elegir cualquier otro **dominio** del hub.
3. Elegir una **Cápsula de Conocimiento** de la lista del dominio (unos 2 minutos cada una) —o, en Hipoacusia, una **micro-guía de hardware**.
4. Leer las **diapositivas** avanzando con “Siguiente” y responder el **quiz rápido** del final; cada respuesta muestra una breve explicación.
5. Al aprobar, la app suma **puntos e insignias en ese dominio** y su **barra de progreso avanza al instante**, sin re-dibujar el resto del hub.

ES PARA EL ADULTO, NO PARA EL NIÑO

Academy vive junto a los menús de la app, que maneja siempre el adulto; la tableta se cede al niño solo cuando el ejercicio ya ha empezado. Por eso el niño no llega por error a esta formación.

EL PROGRESO NO SE PIERDE

El avance (cápsulas hechas, nivel e insignias) se guarda **cifrado en el dispositivo**, igual que el resto de datos, y funciona sin conexión.

Pares Mínimos para dislalias

ACTOR

Tutor + niño/a (en pareja)

PRECONDICIÓN

Par prescrito por el logopeda

PANTALLA

Pares Mínimos · Dislalias

RESULTADO

Sesión de 10 ensayos valorada + evolución del fonema

Bloque para **dislalias fonológicas**. Se muestran dos fichas casi iguales (por ejemplo **rana / lana**); la app pide una en voz alta y el niño la dice al micrófono. Con reconocimiento de voz, la app detecta si salió el fonema o la sustitución habitual; sin micrófono, **el padre hace de juez**. Una **barra de fase de turno** (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) muestra en todo momento en qué paso va el ensayo.

Flujo principal

1. En el **banco de contrastes**, elegir un par prescrito (15 disponibles en 6 grupos: rotacismo, sigmatismo, velares, labiodental, nasales y laterales). Pulsar ►.
2. La app **pide una ficha** en voz alta (“¡Dile a papá cuál quieres! Di: rana”). El niño la dice. La fase de turno avanza de **Escucha** a **Repite**.
3. La app evalúa: **acierto** (3★ al primer intento, 2★ tras corrección), **sustitución** detectada (corrección específica del par) o **aproximación** (reintento).
4. Cada acierto trae una **misión física** (“¡Salto de rana!”) y termina con el **sello doble**: padre e hijo pulsar dos huellas a la vez para continuar.
5. A lo largo de los 10 ensayos hay **rotación de roles** (“¡Ahora mandas tú!”) y una **cápsula TPR** de movimiento. Al final se guarda la sesión y la evolución del fonema.

Flujos alternativos

- **El padre es el juez final**: si la app oyó mal, corrige el veredicto con “dijo rana / dijo lana”.
- **Dos correcciones seguidas**: la app pasa a **imitación asistida** (1★) para no frustrar; nunca hay un tercer fallo seguido.
- **Sin reconocimiento de voz** (Expo Go / navegador): el padre valora con los botones “Dijo ...”.

ANTI-PASIVIDAD

Nada avanza sin las manos de los dos: el sello doble obliga a que el adulto participe en cada ensayo. La rotación de roles convierte al niño en “juez” que discrimina qué palabra dijo el adulto.

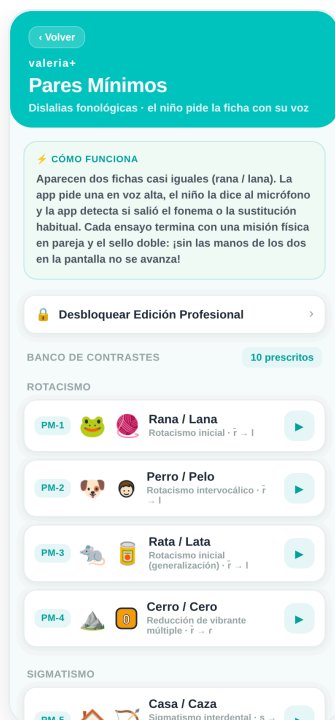


Fig. 6 · Banco de contrastes: los pares agrupados por tipo de error.



Fig. 7 · Ensayo: dos fichas, la consigna y el juez del padre.

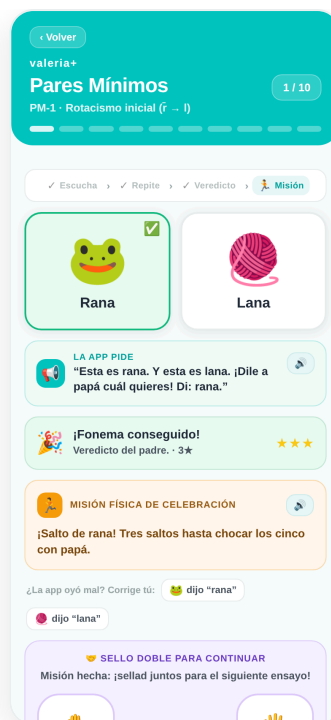


Fig. 8 · Acierto: misión física de celebración y sello doble.

CU-05 · Familia

Expansión Semántica: escenarios, categorías, progresión y contrastes

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Actividad prescrita por el logopeda

PANTALLA

Expansión Semántica · Progresión Léxica

RESULTADO

Palabras trabajadas uniendo símbolo, voz y cuerpo

Rehabilitación léxica **offline** para intervención temprana. Cada palabra une imagen, voz y una **acción física del adulto** que la ancla al mundo real del niño. **Cada bloque declara un objetivo terapéutico único**, visible antes de empezar, y se practica en cuatro pestañas:

Modo	Objetivo declarado	Qué contiene
Escenarios	Repetición verbal dentro de una rutina	5 rutinas diarias (mañana, comida, parque, baño, dormir), 6 palabras cada una.
Categorías	Vocabulario nuevo por campo, de lo familiar a lo raro	5 categorías de 6 palabras (frutas, animales, transportes, colores, el cuerpo) con progresión de dificultad : se empieza por lo más familiar y se avanza a lo menos frecuente.

Progresión	Ampliar el campo semántico de un concepto	9 secuencias de cuatro pasos: concepto → parte → acción → cualidad (coche → rueda → corre → rápido). «El desayuno» da el salto a la combinación de dos palabras («quiero pan»).
Contrastes	Opuestos: primero comprender, después decir	8 cápsulas TPR de pares: grande/pequeño, limpio/sucio, abrir/cerrar, subir/bajar, frío/caliente, encender/apagar, lleno/vacío, meter/sacar.

Como en Pares Mínimos, una **barra de fase de turno** (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) guía cada paso.

Antes de empezar: la antesala de preparación

Toda actividad pasa primero por una **pantalla de preparación** con el material necesario y los pasos que vienen. **Nada suena hasta que el adulto pulsa «Ya lo tengo todo»**. Se puede volver a consultar en cualquier momento desde « Ver preparación», sin perder el paso en curso.

Flujo principal

1. Elegir la pestaña (Escenarios, Categorías, Progresión o Contrastes) y pulsar ► en una actividad prescrita.
2. Leer la **antesala**: qué material hace falta y qué vais a hacer. Confirmar con «Ya lo tengo todo».
3. La app **enseña la imagen y dice la palabra** (“Esto es la cama. Di: cama”). El niño la repite.
4. El micrófono valora el intento aceptando las **aproximaciones propias de la edad**. Si el micrófono no capta nada, el intento **no cuenta** y se vuelve a modelar. El adulto puede dar por válido el intento **en cualquier momento** de la escucha.
5. Cada palabra se cierra con la **acción física del adulto** (“Da unas palmaditas en la cama y sentaos en ella”). Se avanza al siguiente paso.

Contrastes: dos vueltas de distinta naturaleza

Una cápsula de contraste evalúa **dos habilidades distintas**, y por eso tiene dos vueltas:

1. **Comprensión**. Se muestran las **dos imágenes a la vez** y el niño **toca la correcta**. No hay micrófono.
2. **Producción**. El niño **dice** la palabra opuesta y se evalúa por voz.

El panel de resultados y el informe que se comparte con el logopeda las muestran **por separado**. Un promedio único escondía el caso más frecuente en clínica: el niño entiende el par pero todavía no lo dice.

POR QUÉ FUNCIONA

La palabra se aprende cuando el niño la vive con el cuerpo, no solo cuando la oye. En una cápsula, el objeto que nombra el audio, el que muestra la imagen y el que pide la preparación son **el mismo**: lo único que cambia entre las dos vueltas es el atributo contrastado (la misma cuchara, limpia y sucia). Por eso las imágenes son **pictogramas propios** y no emoji: dos emoji iguales harían la vuelta de comprensión irresoluble.



Fig. 9 · Escenarios diarios: mañana, comida y parque.



Fig. 10 · Progresión léxica. Captura tomada en la v9: desde la v9.1 las cuatro fases son concepto → parte → acción → cualidad, y hay una cuarta pestaña de Categorías.



Fig. 11 · Paso: imagen, consigna y misión física del adulto.

CU-06 · Profesional

Prescribir terapias (Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia · Modo Profesional)

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Ficha creada · PIN disponible

Flujo principal

1. En el hub, abrir **Audición** (18 terapias), **Lenguaje** (7), **TEA** (6) o **Dislexia** (6).
2. Pulsar “**Desbloquear Edición Profesional**” e introducir el **PIN** (demo: **1985**).

PANTALLA

Hub → **Audición** / **Lenguaje** / **TEA** / **Dislexia**

RESULTADO

Selección de terapias guardada en el dispositivo

3. Activar o desactivar cada terapia con su interruptor. El contador “N prescritos” se actualiza al momento.
4. Pulsar “**Guardar Prescripción**”. La selección se guarda y la edición vuelve a bloquearse.

Flujos alternativos

- **PIN incorrecto:** los puntos se marcan en rojo y se pueden reintroducir.
- **Solo consulta (sin PIN):** se ve la lista, pero los interruptores están atenuados.
- **Practicar sin editar:** el botón ► de cada fila inicia esa terapia, incluso en Modo Familia. El mismo PIN prescribe en los seis bloques (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia).
- **Consentimiento del módulo TEA:** el **Quiebre Pragmático Inducido** (TEA-2) exige aceptar antes un **encuadre de consentimiento informado**; hasta entonces queda bloqueado.

ESTRESORES SIEMPRE MANUALES

En TEA y Dislexia, el ruido, la latencia y la persecución los aplica el adulto a mano; la app **nunca** ajusta la dificultad ni cronometra sola (muro MDR).



Fig. 12 · Teclado de PIN compartido por todos los bloques.



Fig. 13 · Audición: las 18 terapias con su interruptor de prescripción.

Retomar un paciente e iniciar una sesión

ACTOR

Tutor o cuidador

PRECONDICIÓN

Existe al menos una ficha guardada

PANTALLA

Bienvenida → Selección de paciente → Hub

RESULTADO

Paciente activo cargado y listo para practicar

Flujo principal

1. En **Bienvenida**, pulsar el botón **“Ya tengo un paciente registrado”** (un botón de tamaño completo, al nivel de “Comenzar”).
 2. Seleccionar la ficha del niño/a en la lista de pacientes del dispositivo.
 3. La app carga su prescripción y su progreso (racha, nivel) y abre el **hub de bloques**.
 4. Elegir un bloque para practicar (CU-02).
- **No hay pacientes guardados:** use CU-01 para dar de alta uno nuevo desde “Comenzar”.

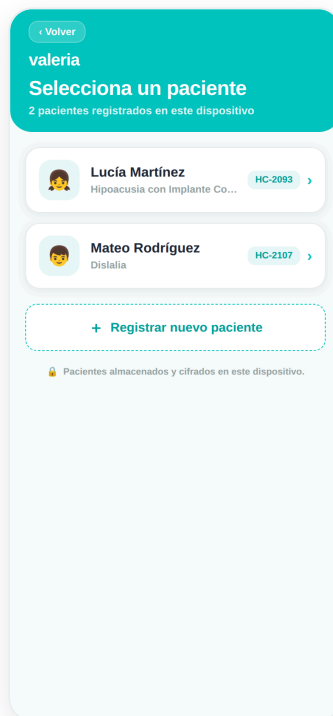


Fig. 14 · Selección de paciente: fichas guardadas en el dispositivo.

Test de Ling previo (audífono / implante)

ACTOR

Tutor que produce los sonidos

PRECONDICIÓN

Patología con audífono o implante coclear

PANTALLA

Test de Ling

RESULTADO

Comprobación auditiva registrada + recomendación

Flujo principal

1. Al pulsar ► en una terapia de **Audición**, responder: **¿el niño usa audífonos o implante?** Si es **No**, se salta a los ejercicios. La cabecera muestra el **nombre del paciente activo** tomado de su ficha de registro.
2. Si es **Sí**, para cada uno de los **6 sonidos** (m, u, a, i, sh, s) el adulto lo produce **tapándose la boca**.
3. Marcar la respuesta del niño: **Identifica** · **Detecta** · **Sin respuesta**.
4. Al terminar, la app muestra el resultado y una recomendación. Pulsar “**Comenzar ejercicios**”.

POR QUÉ ESTOS 6 SONIDOS

Cubren el rango del habla, de graves (~250 Hz) a muy agudos (~5 kHz). El sonido “s” es el más difícil de oír; si se detecta, el equipo funciona bien en frecuencias altas.

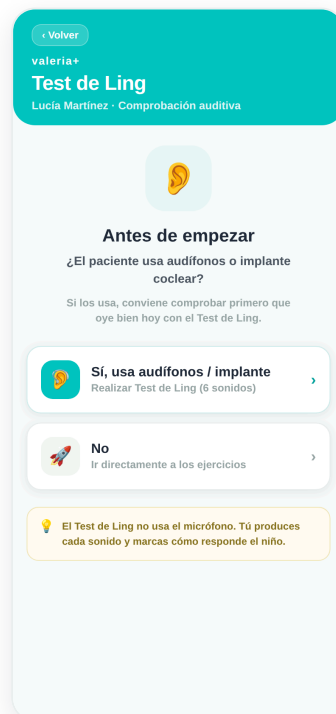


Fig. 15 · Pregunta previa: ¿usa audífonos o implante coclear?



Fig. 16 · Sonido en curso: el tutor lo produce y marca la respuesta.

Realizar una sesión de ejercicios (Audición / Lenguaje)

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Terapia iniciada (con o sin Test de Ling)

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Resultados

RESULTADO

Sesión valorada y guardada en el historial

Flujo principal

1. Cada mini-juego sigue un flujo numerado **PASO 1 → 4**: consigna → juego → movimiento → evaluación. La app presenta **fichas ilustradas** grandes; **toque cualquier imagen para ampliarla** a pantalla completa.
2. Con “ **Otra ronda**” el ejercicio rota su contenido (hasta 3 variantes: vocales, palabra articulada, vocal faltante, intruso, adivinanzas, plurales, frases S-V-O, emociones...), para que el niño no memorice siempre el mismo ítem.
3. El adulto guía la actividad y valora la respuesta con la **escala EPT-3**: ★ emergente, ★★ en proceso, ★★★ consolidado.
4. Cada ejercicio ofrece una “**versión en movimiento**”; entre ejercicios aparecen **pausas activas**. Los de Lenguaje añaden voz (TTS), juego del micrófono y cápsulas TPR.
5. Al terminar se calcula la media y se muestran las **recompensas** (XP, racha, nivel, insignias). Ver CU-11.

Flujos alternativos

- **Sesión completa**: el botón “ **Sesión completa**” de cada bloque encadena todos los ejercicios prescritos en una sola tanda (pasando por el Test de Ling si la ficha lo indica), en vez de lanzarlos de uno en uno.
- **Sesión perfecta**: si todos los ejercicios obtienen ★★★, se desbloquea la insignia “Sesión estrella”.
- **Salir a mitad**: se puede volver atrás; lo valorado hasta ese punto no cuenta como sesión completada.

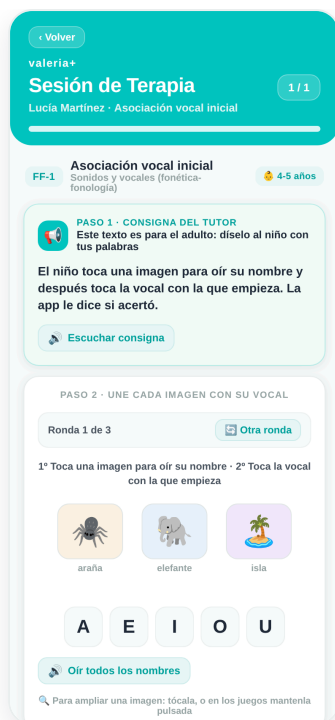


Fig. 17 · Ficha ilustrada: consigna, imágenes ampliables y versión en movimiento.



Fig. 18 · Evaluación EPT-3: el adulto toca 1★, 2★ o 3★.



Fig. 19 · Fin de sesión: XP, racha, nivel y promedio EPT-3.

CU-10 · Familia

Configurar recordatorios diarios

ACTOR

Tutor o logopeda

PRECONDICIÓN

Permiso de notificaciones del sistema

PANTALLA

Hub → “Recordatorios de sesión”

RESULTADO

Avisos en la pantalla de bloqueo, solo en las franjas elegidas

Hay **cuatro franjas** y se elige cuáles se quieren: de las cuatro a ninguna. No es un «todo o nada».

Franja	Qué llega
Mañana · 9:00	Invitación a la sesión del día.
Mediodía · 13:00	Recordatorio corto a media jornada.
Tarde · 17:00	Última llamada para no perder la racha.
Noche · 20:00	Consejo para el adulto , no aviso de juego: uno de los cinco consejos de «el hogar como centro de rehabilitación», que rota cada día. Va dirigido a quien acompaña, no al niño.

Flujo principal

1. En la tarjeta “**Recordatorios de sesión**” del hub, activar el interruptor.
 2. Conceder el permiso de notificaciones si el sistema lo pide.
 3. Marcar o desmarcar las **franjas** que se quieran. El texto de la tarjeta muestra en todo momento cuántos avisos llegarán y a qué hora.
- **Permiso denegado:** aparece un aviso pidiendo conceder el permiso en los ajustes del sistema.
 - **Desactivar una franja:** deja de llegar de inmediato. No solo se deja de reprogramar: se **cancelan** también los avisos que ya estaban en cola.
 - **Quitar las cuatro:** equivale a apagar los recordatorios, y el interruptor maestro se apaga solo.
 - **Al actualizar desde una versión anterior:** quedan activas las cuatro, como hasta ahora. Nadie pierde avisos por el cambio.

CU-11 · Familia

Motivación: racha, niveles e insignias

ACTOR

Niño/a (con apoyo del adulto)

PANTALLA

Fin de sesión · cabecera del hub

PRECONDICIÓN

Al menos una sesión completada

RESULTADO

XP, racha y niveles actualizados

Al estilo de apps como Duolingo, Valeria+ recompensa la constancia en **todos los bloques**. Todo se guarda localmente.

Cómo se gana XP · Niveles · Insignias

- **XP por sesión:** base (20 + 5 por ejercicio) + precisión (hasta +30) + racha (hasta +14) + sesión perfecta (+15).
- **Niveles (cada 100 XP):** Osezno → Oso Curioso → Oso Valiente → Oso Explorador → Oso Sabio → Gran Oso → **Oso Legendario**.
- **Insignias:** 🌱 Primer paso · 🔥 rachas (3/7/14 días) · 🎓 sesiones (10/25/50) · ★ sesiones perfectas.

RACHA VIVA

La racha se mantiene mientras se practique hoy o ayer. Si se salta más de un día, vuelve a cero: por eso ayudan los recordatorios de CU-10.

CU-12 · Profesional / Familia

Consultar el panel de resultados

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Historial de sesiones registrado

PANTALLA

Resultados del paciente

RESULTADO

Visión de la evolución del paciente

Flujo principal

1. Abrir el **panel de resultados** al finalizar una sesión o desde la ficha. La cabecera muestra el **nombre y NHC del paciente activo**, tomados de su ficha de registro.
2. Revisar la **evolución por estrellas** (media de las últimas sesiones) y, para dislalias, la nueva gráfica de **sustitución por fonema**: el % de ensayos con la sustitución detectada por el micrófono, donde *bajar es mejorar*.
3. Consultar el **estado de gamificación** (XP, racha, nivel) y la **adherencia semanal**.
4. El logopeda usa estos datos para ajustar la prescripción (volver a CU-06) en la siguiente revisión.

CICLO DE MEJORA

Resultados → decisión clínica → nueva prescripción → nuevas sesiones. La gráfica de fonema convierte la práctica de pares mínimos en un indicador clínico objetivo entre sesiones.

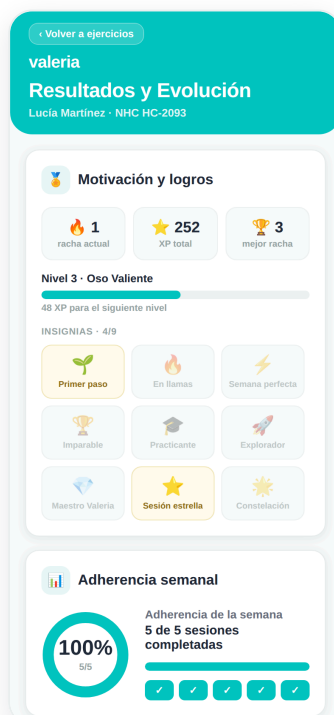


Fig. 20 · Panel: motivación, insignias y adherencia semanal.



Fig. 21 · Evolución por estrellas y sustitución por fonema (bajar = mejorar).

Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Conocer el PIN

PANTALLA

Cualquier bloque prescribible

RESULTADO

Edición habilitada o bloqueada según convenga

Flujo principal

1. Para **entrar** en Modo Profesional: pulsar “Desbloquear Edición Profesional”  e introducir el PIN. El estado pasa a  “Modo profesional activo”.
2. Realizar los cambios de prescripción necesarios en el bloque (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje, TEA o Dislexia).
3. Para **salir**: pulsar “**Guardar Prescripción**”. La edición se bloquea automáticamente y vuelve a Modo Familia.

BUENA PRÁCTICA

Guarde siempre antes de entregar el dispositivo a la familia, para que la prescripción quede protegida en modo solo lectura. El PIN es el mismo en todos los bloques.

Exportar la evidencia de usabilidad del piloto (QR + compartir)

ACTOR

Logopeda / responsable del piloto

PRECONDICIÓN

Se han usado ejercicios · PIN disponible

PANTALLA

Hub de bloques → “Acceso Profesional”

RESULTADO

Resumen en QR + registro completo compartido; datos purgados

Durante el piloto, la app va guardando de forma **anónima y sin molestar** unas métricas de usabilidad (tiempo por pantalla, misclicks y cápsulas de movimiento saltadas) junto con la encuesta breve de satisfacción. Este caso de uso explica cómo el profesional las **saca del dispositivo** para el análisis, con dos salidas a la vez: una **offline** (QR) y otra **online** (compartir).

Flujo principal

1. En el **hub de bloques**, bajar hasta la tarjeta “**Acceso Profesional**” y tocarla.
2. Introducir el **PIN** del logopeda (demo: **1985**).
3. Se abre la pantalla de **exportación**: en el acto aparece un **código QR** con el resumen (nº de sesiones, % de abandono TPR, misclicks y media de la encuesta) y, a la vez, el **menú de compartir** del sistema para enviar el **registro completo** por email o WhatsApp.
4. **Offline**: escanear el QR con otro móvil para capturar el resumen sin necesidad de conexión.
5. **Online**: elegir la app de destino (correo, WhatsApp...) para enviar el registro completo en crudo.
6. Tras un envío correcto, la app **vacía el archivo** del dispositivo y lo confirma (“Log exportado y purgado”).

Flujos alternativos

- **Se cancela el compartir**: el registro **no** se borra; el QR sigue visible y se puede reintentar.
- **Sin conexión**: use solo el QR; el envío por compartir queda para cuando haya red.
- **Resumen muy largo para el QR**: la app avisa y basta con usar el compartir del registro completo.

QUÉ CONTIENE CADA SALIDA

El **QR** lleva solo el **resumen estadístico** comprimido (sin datos personales). El **compartir** envía el **registro completo** de la telemetría anónima y la encuesta, correlacionados por identificador de sesión, para el análisis del piloto.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (SUS)

La pregunta de 1 a 5 ("Fue fácil integrar este ejercicio en la rutina de mi hijo/a") aparece **sola** al completar **4 bloques distintos** y como mucho **una vez por semana** por dispositivo. La familia no tiene que buscarla ni configurarla.

Elegir la variedad de terapia (Castellano · Galego · Dominicano · Euskera)

ACTOR

Logopeda o tutor

PANTALLA

Tarjeta “Voz de la app”

PRECONDICIÓN

App abierta (funciona sin conexión)

RESULTADO

El contenido se locuta y evalúa en la variedad elegida

Valeria+ puede trabajar el contenido terapéutico en **cuatro variedades**. La **interfaz** (menús y botones) sigue en castellano; lo que cambia es **lo que se dice, se muestra y se evalúa**. La elección se guarda en el dispositivo y se aplica a todos los bloques.

Variedad	Cómo suena y evalúa
 Castellano	Voz neuronal Sharvard pregenerada (offline) y reconocimiento del sistema en español de España.
Galego (Proxecto Nós)	Voz neuronal Celtia pregenerada en gallego; contenido y pares propios. El contenido compartido con el castellano (Expansión Semántica, Audición y Lenguaje) suena con la voz neuronal castellana mientras Celtia no lo cubra.
 Dominicano (Quisqueya Habla)	Usa la voz latina del dispositivo y el micrófono en es-DO; respeta los rasgos del habla caribeña.
Euskera (batua · ILENIA/NEL-GAITU)	Voz neuronal HiTZ-TTS pregenerada (UPV/EHU · Aholab), empaquetada y offline. El reconocimiento usa eu-ES donde el dispositivo lo trae; si no, recae en es-ES con un pliegue de la ⟨h⟩ muda que no penaliza las sibilantes ni africadas (contraste clínico que valora el adulto).

Flujo principal

1. Abrir la tarjeta “**Voz de la app**” y localizar “**Variedad de la voz**”.
2. Tocar **Castellano**, **Galego**, **Dominicano** o **Euskera**.
3. La app cambia al instante la locución y el reconocimiento; la tarjeta muestra un aviso sobre la voz disponible.

Flujos alternativos

- **En dominicano suena peninsular o robótica:** instalar una voz de “Español (Latinoamérica)” en los ajustes del dispositivo; la app la usará automáticamente.
- **En euskera sin reconocedor vasco:** el dispositivo escucha en es-ES con el pliegue de la ⟨h⟩; si tampoco hay micrófono (Expo Go / web), el adulto valora con botones, como en el resto de variedades.
- **Falta la voz pregenerada de una locución:** en galego se reproduce primero el asset neuronal castellano equivalente si existe; en último término, la app recae con suavidad en la

voz del sistema, sin interrumpir la sesión.

RESPETO DIALECTAL

En dominicano, la app **no marca como error** el seseo, la aspiración de la “s” ni el cambio de “r/l” a final de sílaba: son rasgos normales del habla, no fallos que corregir.



Fig. 22 · Tarjeta “Voz de la app”: selector de variedad Castellano · Galego · Dominicano · Euskera.

CU-16 · Profesional

Panel del Adulto: carga comunicativa (ruido, doble tarea, quiebre)

ACTOR

Adulto que dirige la sesión (logopeda o tutor)

PRECONDICIÓN

Ejercicio de Audición/Lenguaje en curso

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Panel del Adulto

RESULTADO

Reto de carga aplicado a mano y registrado

Para el **piloto clínico**, el **Panel del Adulto** (tarjeta plegable dentro del ejercicio) añade tres módulos de **carga comunicativa**. Todos son **manuales**: la app nunca los activa, mide ni ajusta por su cuenta; es el adulto quien decide cuándo y cuánto.

Módulo	Qué hace
 Escucha en ruido	Un slider añade ruido de fondo (bullicio de cafetería) por debajo de la instrucción. El volumen sube o baja solo con el dedo del adulto.

 Doble tarea	Un oso distractor se asoma y se mueve por el borde de la pantalla sin ser tocable : obliga al niño a atender a la voz pese a la interferencia visual.
 Quiebre pragmático	La app calla y el adulto rompe la comunicación a propósito ; luego marca la estrategia de reparación que usó el niño.

Flujo principal

1. Durante el ejercicio, desplegar la tarjeta **“Panel del Adulto”**.
2. Activar el módulo deseado: mover el **slider de ruido**, encender el **oso distractor** o lanzar el **quiebre pragmático**.
3. Guiar la respuesta del niño y, en el quiebre, seleccionar la **estrategia de reparación** observada.
4. Desactivar el módulo cuando convenga; el nivel de reto queda registrado de forma anónima.

ANTES DEL QUIEBRE PRAGMÁTICO

Un aviso recuerda que la tarea genera “frustración útil” y se puede cancelar. Explicarlo evita que la familia lo viva como un fallo de la app.

SIEMPRE EN MANOS DEL ADULTO

Ningún módulo se activa solo. Esta regla es deliberada: mantiene la app como herramienta de apoyo a la terapia, no como un aparato de medición automática.

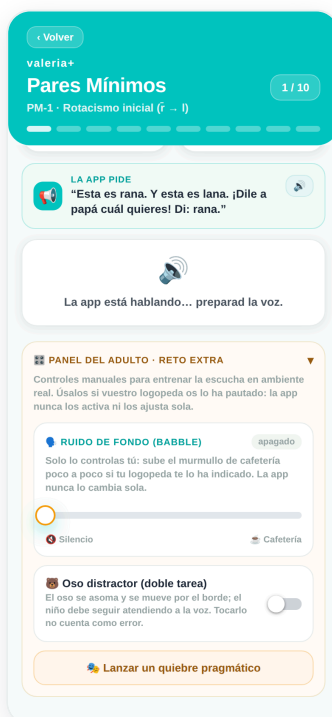


Fig. 23 · Panel del Adulto desplegado: ruido de fondo, oso distractor y quiebre pragmático.

Academy: aprender lo básico de Lengua de Signos Española

ACTOR

Adulto que acompaña al niño

PANTALLA

Academy → dominio «Lengua de Signos (LSE)»

PRECONDICIÓN

Ninguna; disponible desde el primer día

RESULTADO

Base para entender la LSE y decidir con criterio

Sexto dominio de Academy, propuesto por las logopedas de ACOPROS. Seis cápsulas que dan una **puerta de entrada** a la Lengua de Signos Española: qué es, qué relación tiene con el habla y cómo empezar a comunicarnos hoy mismo.

Cápsula	Qué responde
La LSE es una lengua, no mímica	Tiene léxico, orden de frase y morfología propios; no es español traducido a gestos. Está reconocida por la Ley 27/2007 .
¿Signar retrasa el habla?	La duda que trae casi toda familia. Lo que compromete el desarrollo es no tener acceso pleno a ninguna lengua en los primeros años, no la exposición a dos.
De qué está hecho un signo	Configuración, lugar, orientación y movimiento , más la expresión facial. Cambiar un solo parámetro puede cambiar la palabra.
El alfabeto dactilológico	Deletrear con la mano, con las configuraciones dibujadas. Sirve para nombres propios y palabras aún sin signo conocido.
Primeros signos con utilidad real	No los colores ni los animales: los que le permiten pedir (más, comer, ayuda). Un niño que puede pedir deja de tener que llorar para que le entiendan.
Dónde se aprende de verdad	Con personas sordas signantes y cursos oficiales. Ninguna app sustituye la conversación real.

QUÉ ES Y QUÉ NO ES ESTE MÓDULO

Un signo combina configuración de la mano, lugar, orientación y **movimiento**. Un dibujo estático captura los tres primeros y **no** el cuarto. Por eso el módulo enseña lo que sí es enseñable así —el alfabeto dactilológico, cuyas configuraciones son posturas fijas— y para el léxico signado **remite a fuente signada**. Es una puerta de entrada, no un curso de LSE.

¿Y la prioridad de la audición?

Valeria+ da prioridad al oído dentro de sus ejercicios auditivo-verbales: nombra antes de mostrar, para que el niño entrene la escucha. Eso sigue valiendo. La LSE es otra cosa: una lengua con estatuto legal propio a la que tu hijo puede tener derecho, y **su adopción la decidís la familia y el equipo clínico**, no una app. La primera cápsula del módulo aborda esa relación de frente para que no queden dos mensajes sueltos que parezcan reñidos.

Flujo principal

1. Abrir **Academy** desde la tarjeta del hub y elegir el dominio 🙋 **Lengua de Signos (LSE)**.
 2. Empezar por «**La LSE es una lengua, no mímica**», y seguir por «**¿Signar retrasa el habla?**»: el feed las propone en ese orden a propósito.
 3. Leer las diapositivas —las de configuraciones muestran el **dibujo de la mano**— y responder el quiz.
 4. Practicar el **alfabeto** frente al espejo deletreando el nombre del niño, cada día, hasta que lo reconozca.
 5. Contarle a la logopeda que estáis empezando con signos, para que el plan de casa y el de la sesión sean uno solo.
- **Progreso independiente:** la XP de este dominio no se mezcla con la del resto; tiene su propia escala («Experto en LSE») e insignias.
 - **Al actualizar:** el dominio aparece con el progreso a cero y el del resto de dominios se conserva intacto.

VALIDACIÓN

El contenido de las seis cápsulas y las **configuraciones de mano dibujadas** fueron revisados y aprobados por una **persona sorda signante**. Es la única revisión que puede decir si una silueta se reconoce como la letra que dice ser.

ANEXO A

Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Situación	Qué hacer
No recuerdo el PIN profesional	El PIN lo define el logopeda. En la demo es 1985 y es el mismo en todos los bloques. Si se olvida en producción, debe restablecerse desde la configuración de la app.
El micrófono no reconoce la voz	En Expo Go y en el navegador web no hay reconocimiento de voz: use el modo juez (el adulto valora con botones). En la app instalada, revise el permiso de micrófono.
La app oyó mal en Pares Mínimos	El padre es el juez final: use “dijo rana / dijo lana” para corregir el veredicto. Un falso positivo no penaliza al niño.
No avanza tras la misión física	Es el sello doble : padre e hijo deben pulsar las dos huellas a la vez. Con una sola mano, mantenga pulsada una huella 2 segundos.
No aparece el Test de Ling	Solo se muestra en los ejercicios de Audición si la patología indica audífono o implante coclear (CU-08).

La racha volvió a cero	Se perdió porque pasó más de un día sin practicar. Active los recordatorios (CU-10) para evitarlo.
No puedo cambiar qué se practica	Está en Modo Familia (solo lectura). Desbloquee el Modo Profesional con el PIN (CU-06 / CU-13).
¿Se pierden los datos al cerrar la app?	No. Ficha, prescripción, historial, evolución por fonema y progreso se guardan cifrados en el dispositivo.
El mismo ejercicio se repetía siempre igual	Use “  Otra ronda”: cada mini-juego rota hasta 3 contenidos distintos. Para practicar todo lo prescrito de golpe, use “  Sesión completa”.
¿Necesito conexión o crear una cuenta?	No. La app funciona en local sin conexión. El acceso profesional con correo y contraseña (sincronización en la nube) es opcional y solo se usa para pruebas con profesionales.
¿Qué datos recoge el piloto sobre mi hijo/a?	Solo métricas anónimas de usabilidad (tiempo por pantalla, misclicks y cápsulas saltadas) y una encuesta breve. No se guardan nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas. Todo se cifra en el dispositivo.
¿Por qué apareció una encuesta con caritas?	Es la encuesta de satisfacción del piloto (SUS). Solo aparece al completar 4 bloques distintos y como mucho una vez por semana. Se puede cerrar sin responder.
¿Cómo exporto los datos del piloto?	Desde el hub, tarjeta “ Acceso Profesional ” con el PIN: la app muestra un QR con el resumen y abre el compartir con el registro completo. Tras enviarlo, los datos se purgan (CU-14).
¿Puedo usar la app en gallego, dominicano o euskera?	Sí. En la tarjeta “ Voz de la app ” se elige la variedad (Castellano, Galego, Dominicano o Euskera). Cambia lo que se locuta y evalúa; los menús siguen en castellano (CU-15).
En dominicano la voz suena de España o robótica	Instale una voz de “ Español (Latinoamérica) ” en los ajustes del dispositivo. La app la detecta y la usa automáticamente.
En galego, algunos ejercicios no hablan	La Expansión Semántica y los ejercicios de Audición y Lenguaje suenan con la voz neuronal castellana mientras Celtia no cubra ese contenido, en vez de quedar en silencio. Actualice la app si sigue ocurriendo.
Marca como error algo que en mi país se dice así	En la variedad dominicana la app respeto los rasgos del habla caribeña (seseo, “s” aspirada, “r/l” final). Y recuerde: el adulto es siempre el juez final del veredicto.
Apareció ruido de fondo o un oso moviéndose	Son módulos del Panel del Adulto (carga comunicativa) del piloto; solo se activan a mano. Desactívelos desde ese mismo panel (CU-16).

¿Qué son los bloques de TEA y Dislexia?	TEA (6 terapias, protocolo PRT + TCC) y Dislexia (6 terapias de conciencia fonológica y acceso léxico). Se prescriben con el mismo PIN que el resto y sus estresores los activa siempre el adulto (CU-06).
¿Qué es la tarjeta “Academy” del hub?	Es la formación para el adulto, organizada en cinco dominios (Lenguaje, Hipoacusia, Dislalias, Dislexia y TEA). Cápsulas breves con quiz sobre cómo aprenden a hablar los niños, el manejo de los dispositivos auditivos, los sonidos difíciles y más; un feed destaca el dominio que encaja con la patología de la ficha. No es un ejercicio para el niño (CU-03).

Historial de versiones

Este manual describe Valeria+ en su **estado actual (v9.1)**. La siguiente tabla resume, a título informativo, cómo ha ido creciendo la app, por si resulta útil a quienes usaron versiones anteriores.

Versión	Hitos principales
v5	Primeros bloques (Pares Mínimos y Expansión Semántica), Modo Profesional con PIN compartido por todos los bloques y almacenamiento local cifrado.
v6	Voz más humana, rondas variadas (“Otra ronda”), botón de sesión completa, fase de turno visible, pictogramas de alto contraste y sincronización en la nube opcional (Firebase).
v7	Instrumentación del piloto: telemetría de usabilidad anónima, encuesta SUS, guardado cifrado con purga y exportación dual (QR + compartir).
v8	Tres variedades de habla (Castellano, Galego y Dominicano) con voz neuronal offline, respeto dialectal, Panel del Adulto de carga comunicativa y frases portadoras.
v8.1	Botón de reingreso a tamaño completo, resultados y Test de Ling con el paciente real, y voz gallega que siempre arranca.
v8.2	Academy: primeras Cápsulas de Conocimiento para el cuidador, con quiz y progreso por niveles.
v9	Bloques de TEA y Dislexia, Audición ampliada a 18 terapias (escucha en ruido), banco castellano de 15 pares, cuarta variedad (Euskera) y Academy multidominio.
v9.1	Mejoras nacidas de la revisión clínica de las logopedas de ACOPROS: categorías léxicas con progresión de dificultad, antesala de preparación antes de cada actividad, contrastes con doble vuelta (comprender y decir) sobre pictogramas propios, escucha más tolerante que no penaliza los fallos del micrófono, recordatorios por franjas y el módulo de Lengua de Signos Española en Academy.

Sobre las capturas de pantalla. Las imágenes de este manual se tomaron en la v9. Los textos describen el comportamiento de la **v9.1**, así que en las pantallas de Expansión Semántica y de recordatorios verás alguna diferencia respecto a la captura: la cuarta pestaña de Categorías, la antesala de preparación y el selector de franjas son posteriores a esas capturas.