

valeria+



Manual de uso

Cómo usar la app, paso a paso. Para la familia que practica en casa y para el logopeda que prescribe.

Versión 15 · Septiembre de 2026

Si solo va a leer una página, lea «Los primeros quince minutos».

Castellano · Galego · Dominicano · Euskara · English (US) · Català

CONTENIDO

Índice

PARA EMPEZAR

- 1 Qué es Valeria+ y quién hace qué
- 2 Los primeros quince minutos

EL DÍA A DÍA

- 3 Las tareas de cada día
- 4 Qué hay dentro: los diez bloques

PARA EL LOGOPEDA

- 5 Prescribir, ajustar y exportar

AJUSTES Y GARANTÍAS

- 6 Idiomas y voces
- 7 Privacidad: qué se guarda y qué no
- 8 Si algo va mal

ANEXO

- A El peluche Lúa

Qué es Valeria+ y quién hace qué

Valeria+ es una app para **practicar lenguaje en casa**, con el niño y un adulto al lado. Hace dos cosas, y en este orden: primero **le explica al adulto** qué le pasa a su peque y cómo acompañarle, y después le da **ejercicios para hacer juntos**. Por eso la app abre en Academy y no en la rejilla de ejercicios.

LA REGLA QUE LO EXPLICA TODO

El adulto dirige la sesión y tiene la última palabra. Donde hay micrófono, este ayuda, pero si la app oye mal, usted corrige el veredicto con un toque. Donde no hay micrófono, usted valora con botones. La app nunca decide sola.

Las tres pestañas de abajo

Toda la app cabe en tres pestañas. Si se pierde, vuelva aquí.

Pestaña	Qué encontrará
Academy	Formación para usted , no para el niño. Cápsulas de dos minutos sobre lenguaje, hipoacusia, dislalias, dislexia, TEA, mitos y lengua de signos.
Ejercicios	La rejilla de bloques para practicar. Aquí está también la tarjeta de Lúa con el progreso y los premios.
Ajustes	Voz e idioma, recordatorios y acceso profesional.

Las dos formas de usar la app

Las dos conviven en el mismo aparato. No hay que cerrar sesión: se cambia con un **PIN de cuatro dígitos** que define el logopeda.

Modo	Quién	Qué puede hacer
Familia el de siempre	Madre, padre o cuidador	Practicar lo que hay prescrito, hacer las sesiones, poner recordatorios y ver el progreso.
Profesional pide PIN	Logopeda	Todo lo anterior y además elegir qué se practica . Al guardar, vuelve solo al modo Familia.

EL PIN

En la demostración es **1985**, y es el mismo en todos los bloques. En un uso real, el logopeda lo cambia por uno suyo.

Lúa



Lúa es la gata de la app. Está en el icono, en el arranque, en la tarjeta de progreso y al terminar cada sesión, y da nombre a los niveles y a los premios. Para el niño es la cara de la práctica diaria: lo que le hace volver mañana.

Se la puede **acariciar** tocándola en la pestaña Ejercicios. Ronronea y sale un corazón. No suma nada: es afecto, no una mecánica.

Los primeros quince minutos

Cuatro cosas, en este orden. Cuando termine, ya habrá hecho una sesión completa.

PASO 1 Crear la ficha del niño

Se hace una sola vez. Los datos se guardan cifrados en el aparato y no salen de él.

1. Abrir la app y pulsar **«Comenzar»**. Pasar la pantalla de créditos con **«Continuar»**.
2. Elegir **«Paciente nuevo»**.
3. Rellenar los datos del niño: **nombre y apellidos**, fecha de nacimiento, **NHC** y género.
4. Rellenar los del **tutor**: nombre, vínculo, **correo** y teléfono.
5. Elegir la **patología** y anotar el médico y el logopeda.
6. Pulsar **«Guardar ficha»**. Sale la confirmación «Ficha guardada y cifrada».

Y SI...

- **Un campo se pone rojo:** falta un dato obligatorio o el correo no tiene formato válido. No guarda hasta corregirlo.
- **La patología lleva audífono o implante:** la app lo recuerda y propondrá el Test de Ling antes de los ejercicios de audición.

Fig. 1 · La ficha, con los campos obligatorios marcados.

Fig. 2 · Guardada y cifrada en el aparato.

PASO 2 Elegir la voz y el idioma

Solo si no va a trabajar en castellano. Si va a trabajar en castellano, sáltelo.

1. Pestaña **Ajustes** → tarjeta «Voz de la app».
2. Tocar la variedad: **Castellano**, **Galego**, **Dominicano**, **Euskara**, **English (US)** o **Català**.

El cambio es inmediato y se guarda. Afecta a lo que el niño oye y a cómo se evalúa, en todos los bloques. El capítulo 6 lo cuenta entero.



Fig. 3 · Las seis variedades.

PASO 3 Empezar por Academy

Quince minutos aquí valen más que quince de ejercicios a ciegas. En estos ejercicios el motor es usted, así que aprender a acompañar es parte del tratamiento.

1. Pestaña **Academy**. Arriba, «**Tu prioridad de hoy**» propone el dominio que encaja con la patología de la ficha.
2. Abrir una **cápsula** (unos dos minutos).
3. Pasar las diapositivas con «**Siguiente**» y responder el **quiz** del final. Cada respuesta se explica.

Hay siete dominios: Lenguaje, Mitos y verdades, Hipoacusia y sordera, Dislalias, Dislexia, TEA y Lengua de Signos. Academy lleva sus propios puntos e insignias, aparte de los del niño.



Fig. 4 · Los dominios, con la prioridad arriba.

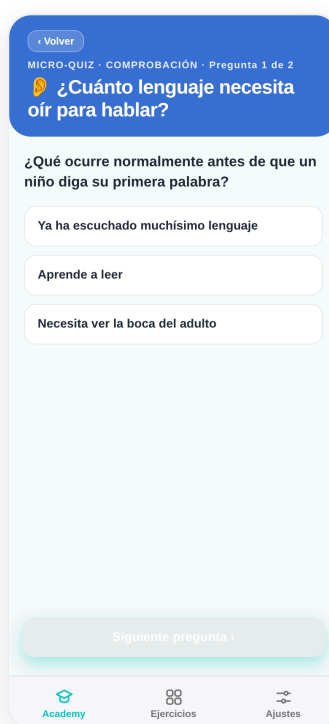


Fig. 5 · El quiz explica cada respuesta.

PASO 4 Hacer la primera sesión

Si no sabe por dónde empezar, entre por **Aventuras con Lúa**: se elige por edad, no por patología, y no hace falta que el niño sepa leer.

1. Pestaña **Ejercicios**.
2. Tocar **Aventuras con Lúa**, la tarjeta de la gata.
3. Elegir la **franja de edad** en la fila de arriba.
4. Abrir **Ejercicios con Lúa** y hacer la serie.



Fig. 6 · La rejilla de bloques, con la tarjeta de Lúa arriba.



Fig. 7 · Aventuras con Lúa, filtrado por edad.

Las tareas de cada día

Cada apartado es una cosa que va a querer hacer. Busque la que necesite; no hace falta leerlos en orden.

TAREA Volver a un niño ya registrado

Familia

1. Abrir la app y pulsar «**Comenzar**», luego «**Continuar**».
2. Elegir «**Ya tengo un paciente**».
3. Tocar su ficha en la lista.

La app carga su prescripción y su progreso —racha y nivel— y abre Academy. Los bloques están en la pestaña **Ejercicios**.

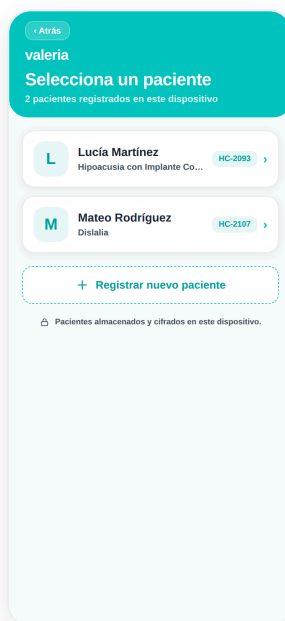


Fig. 8 · Las fichas guardadas en el aparato.

Vale para Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia: los cuatro usan el mismo reproductor.

1. En **Ejercicios**, abrir el bloque y pulsar ► en una actividad. O usar **«Sesión completa»**, que encadena de una vez todo lo prescrito.
2. Si la actividad pide material real (burbujas, una pelota, un tambor), la app lo dice arriba del todo en **«ANTES DE EMPEZAR · NECESITARÁS»**. Búsquelo ahora, no a mitad.
3. Seguir los cuatro pasos que la app va marcando: **consigna** → **juego** → **movimiento** → **evaluación**. Cualquier dibujo se amplía tocándolo.
4. Valorar la respuesta del niño con las tres estrellas: ★ emergente, ★★ en proceso, ★★★ consolidado.
5. Al terminar, la app calcula la media y muestra lo ganado: XP, racha, nivel e insignias.

Y SI...

- **El niño se aburre del mismo ítem:** **«Otra ronda»** rota hasta tres contenidos distintos del mismo ejercicio.
- **La actividad se repite cada sesión:** algunas traen **«OTRAS FORMAS DE HACERLA»**. Es lo mismo con otro envoltorio; repetida idéntica, el niño la ejecuta en automático y deja de medir nada.
- **Hay que salir a mitad:** se puede. Lo valorado hasta ahí no cuenta como sesión completada.
- **El niño lleva mal los cambios:** junto a la evaluación la app dice **qué viene después**, para que pueda anunciárselo antes de puntuar.
- **Todo sale ★★★:** es sesión perfecta y desbloquea la insignia «Oído de lince».

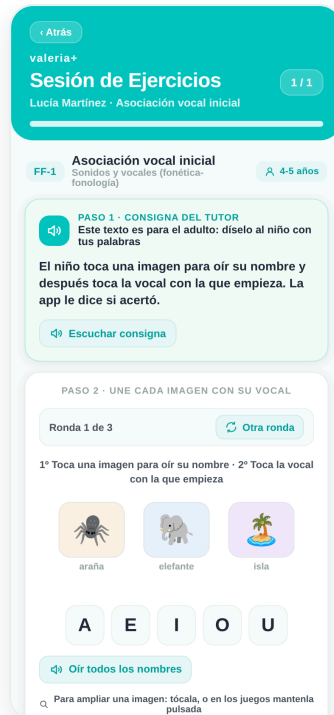


Fig. 9 · Un ejercicio, con el material anunciado arriba.



Fig. 10 · Las tres estrellas las pone el adulto.

Es el **Test de Ling**. Solo aparece en los ejercicios de Audición y solo si la ficha indica audífono o implante coclear.

1. Al pulsar ► en Audición, la app pregunta si el niño usa audífonos o implante. Si responde **No**, va directa a los ejercicios.
2. Si responde **Sí**, produzca usted cada uno de los seis sonidos —**m, u, a, i, sh, s**— **tapándose la boca**.
3. Marcar qué hizo el niño: **Identifica**, **Detecta** o **Sin respuesta**.
4. Leer el resultado y la recomendación, y pulsar «Comenzar ejercicios».



Fig. 11 · Los seis sonidos, uno a uno.

1. El panel de resultados se abre al terminar una sesión, o desde la ficha del paciente.
2. Arriba, la **evolución por estrellas**: la media de las últimas sesiones.
3. En dislalias, la **gráfica de sustitución por fonema**: qué porcentaje de intentos salió con la sustitución. Aquí **bajar es mejorar**.
4. Después, la racha, el nivel y la **adherencia semanal**.

EL «RECuento DEL MICróFONO» NO ES UNA MEDIDA CLÍNICA

Al final del panel, separada a propósito, hay una tarjeta que dice cuántas palabras reconoció el micrófono. Es un **apoyo del ejercicio**, no un resultado: mide lo bien que oye el teléfono, no lo bien que habla el niño. No aparece hasta que se ha practicado alguna frase.

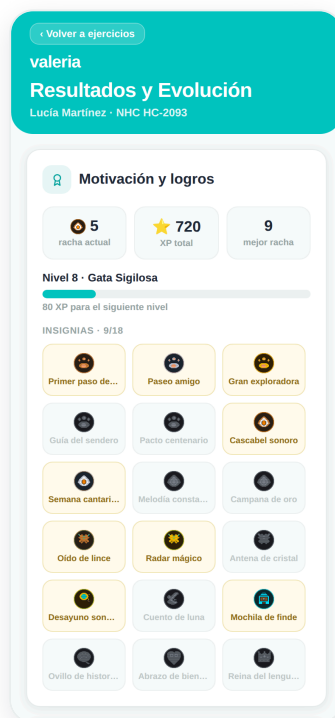


Fig. 12 · Evolución por estrellas y adherencia.



Fig. 13 · Sustitución por fonema: bajar es mejorar.

1. Pestaña **Ajustes** → «**Recordatorios de sesión**» → encender el interruptor.
2. Conceder el permiso de notificaciones si el sistema lo pide.
3. Marcar las franjas que quiera. Puede quedarse con una, con las cuatro o con ninguna.

Franja	Qué llega
Mañana · 9:00	Invitación a la sesión del día.
Mediodía · 13:00	Recordatorio corto.
Tarde · 17:00	Última llamada para no perder la racha.
Noche · 20:00	Un consejo para usted , no un aviso de juego. Rota cada día.

Y SI...

- **Denegó el permiso:** la app avisa; hay que concederlo en los ajustes del teléfono.
- **Apaga una franja:** deja de llegar en el acto. También se cancelan los avisos ya en cola.
- **Quita las cuatro:** equivale a apagar los recordatorios, y el interruptor grande se apaga solo.

La colección es del niño, así que **no pide PIN**.

1. En **Ejercicios**, tocar «**Premios** » en la tarjeta de Lúa.
2. Arriba: el nivel con su nombre, lo que falta para el siguiente, la racha viva y la XP total.
3. En medio, la **escalera de los doce niveles**, de Gatita a Gata Legendaria.
4. Después, las **dieciocho insignias**. Las ganadas en color; las pendientes en gris y **con la condición escrita** («7 días seguidos practicando»).
5. Al final, el **armario**: cinco accesorios. Tocar uno desbloqueado se lo pone a la gata, o se lo quita.

Concepto	Cómo funciona
XP	Se gana al terminar cualquier sesión. Cuanto mejor y más constante, más.
Nivel	Uno cada 100 XP, hasta doce.
Racha	Días seguidos con al menos una sesión. Se mantiene si se practicó hoy o ayer.

Y SI...

- **Aparece una insignia que no recuerda haber ganado:** es un regalo, no un fallo. Al volver a la rejilla la app repasa las condiciones con todo lo practicado hasta ahora. Con los accesorios pasa igual.
- **Llega a Gata Legendaria:** la barra deja de pedir XP y lo dice. La racha y las insignias siguen contando.
- **La racha volvió a cero:** pasó más de un día sin practicar. La **mejor racha** no se borra y las insignias ya ganadas se conservan.



Fig. 14 · Nivel, racha y la escalera de los doce.



Fig. 15 · Las pendientes llevan escrita su condición.

Qué hay dentro: los diez bloques

Van en el mismo orden que en la pantalla. Cuatro de ellos —Aventuras con Lúa, la Pizarra Mágica, y los premios— **no hace falta que los prescriba nadie**: están siempre abiertos.

Bloque	Para quién y para qué
● Integración Sensorial 6 actividades	Para el niño que se tapa los oídos con la aspiradora, el secador o el timbre. Se expone al sonido en pequeño y con control . Once sonidos, tres de ellos ambientes completos (aula, centro comercial, calle con obras).
● Aventuras con Lúa 105 actividades	La puerta de entrada si no sabe por dónde empezar : se elige por edad (de 0-2 a 7-10), no por diagnóstico. Ejercicios, juegos, cuentos y canciones. Nada se responde leyendo.
● Pares Mínimos 15 pares	Dislalias. Pares de palabras casi iguales —rana / lana— para trabajar el sonido que se sustituye.
● Expansión Semántica	Vocabulario en intervención temprana: escenarios del día a día, categorías, progresiones y contrastes, uniendo imagen, voz y movimiento.
● Audición 18 ejercicios	Para audífono, implante coclear o hipoacusia. Incluye escucha con ruido de fondo.
● Lenguaje 7 ejercicios	Atención conjunta, imitación, comprensión, expresión, comunicación funcional, regulación e interacción.
● TEA 6 ejercicios	Espectro autista. Todos los retos los activa el adulto a mano , nunca la app.
● Dislexia 6 ejercicios	Conciencia fonológica y acceso a la palabra: intruso, pseudopalabras, rotaciones b/d y p/q, denominación rápida.
● Pizarra Mágica 6 trazos	Trazar la <i>b</i> y la <i>d</i> sin invertirlas, con el dedo o lápiz óptico. Es la continuación de Dislexia: allí se <i>distinguen</i> , aquí se <i>escriben</i> .
● Realidad Aumentada Solo Android, en teléfono	La cámara frontal como sensor de movimiento: la boca, el giro de la cabeza, la mirada, el gesto. El premio se gana con el cuerpo, no con la voz.

Aventuras con Lúa

CÓMO SE USA Elegir por edad y jugar sin saber leer

1. En **Ejercicios**, tocar **Aventuras con Lúa**.
2. Elegir la **franja de edad** arriba. El filtro afecta a las cuatro secciones a la vez; si una no tiene nada para esa edad, lo dice.
3. Abrir una sección y elegir la pieza.
4. Tocar el **altavoz** para que Lúa lea la consigna las veces que haga falta.
5. El niño responde tocando el dibujo. Si acierta, Lúa lo celebra; si no, se lo dice bien dicho, sin regañarle.
6. Al terminar, **«Terminar y ganar premio»**.

Sección	Qué es
Ejercicios con Lúa · 60	Lúa pide una cosa cada vez, graduada por edad: señalar, imitar, nombrar, seguir una instrucción. Diez por franja.
Juegos con Lúa · 25	Memorama, imagen-palabra, sonidos iniciales, secuencias, clasificar, atención y pistas.
Cuentos con Lúa · 10	Historias ilustradas con preguntas de comprensión, vocabulario y un dibujo libre.
Canciones y praxias · 10	Canciones con pausas activas, ritmo y movimientos de boca y cara.

DOS COSAS QUE VERÁ EN PANTALLA

«Para el adulto» es la pauta de montaje: qué tiene que preparar o hacer usted («con la pelota a la vista», «el adulto sopla primero»). El niño no la oye.

«Registro del adulto» son las respuestas que **usted** marca observando al niño. No son botones para él.

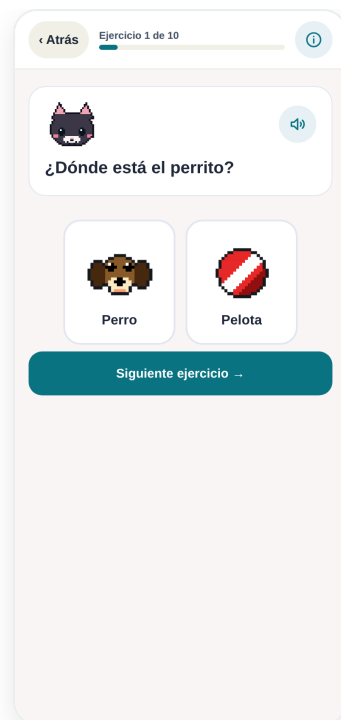


Fig. 16 · El niño responde tocando el dibujo.

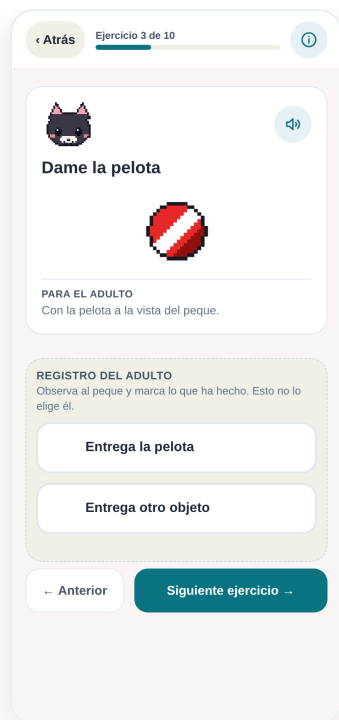


Fig. 17 · La pauta y el registro, separados de la consigna.

Pares Mínimos

CÓMO SE USA Diez intentos con un par de palabras

1. Elegir un par del banco —hay 15, en seis grupos— y pulsar ►.
2. La app dice el par y pide uno: «rata... lata... dime: rata». El niño lo repite.
3. La app compara lo que ha oído con las dos palabras y se queda con la más parecida.
4. Cada acierto trae una **misión física** («¡Salto de rana!») y se cierra con el **sello doble**: adulto y niño pulsan las dos huellas a la vez.
5. A lo largo de los diez intentos hay cambio de roles y una pausa de movimiento.

Y SI...

- **La app oyó mal:** corríjala con «**dijo rana / dijo lana**». Usted es el juez final y un fallo del micrófono no le gasta el intento al niño.
- **Sale «casi» a menudo:** es a propósito. Cuando lo oído se parece igual a las dos palabras, la app **no se moja** y le deja el veredicto a usted.
- **Falla dos veces seguidas:** la app pasa a imitación asistida. Nunca hay un tercer fallo seguido.
- **No avanza tras la misión:** es el sello doble. Con una sola mano, mantenga pulsada una huella dos segundos.



Fig. 18 · El turno, con la fase marcada arriba.

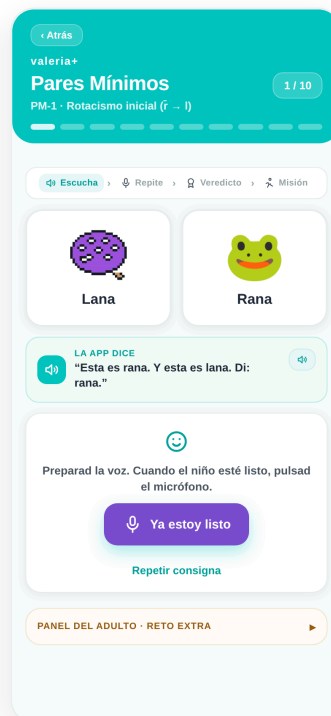


Fig. 19 · Veredicto, misión y sello doble.

Expansión Semántica

CÓMO SE USA Una palabra, con imagen, voz y cuerpo

1. Elegir pestaña —Escenarios, Categorías, Progresión o Contrastes— y pulsar ►.
2. Leer la **antesala**: qué material hace falta y qué van a hacer. Confirmar con «Ya lo tengo todo».
3. La app enseña la imagen y dice la palabra. El niño la repite.
4. Cerrar cada palabra con la **acción física** que propone («da unas palmaditas en la cama y sentaos en ella»).

En **Contrastes** hay dos vueltas: primero el niño **señala** la imagen correcta —sin micrófono— y después **dice** la palabra opuesta.

Y SI...

- **El micrófono no capta nada:** el intento no cuenta y se vuelve a modelar. Usted puede dar el intento por bueno en cualquier momento.



Fig. 20 · Imagen, palabra y acción.

Integración Sensorial

CÓMO SE USA Una exposición sonora, de principio a fin

Aquí no se trata de aguantar. Se trata de que el niño **sepa cuándo llega el sonido y pueda cortarlo**. Esa es la diferencia entre una exposición y un susto.

1. **Usted prepara, antes de darle el aparato.** Elija el sonido, la **intensidad del 1 al 5** y cuánto dura: 3, 7 o 15 segundos. La pantalla le enseña también la estrategia de calma de ese sonido —amasar plastilina, manos en la mesa y tres respiraciones, un abrazo firme—.
2. **Ahora sí, el aparato para el niño.** Antes de sonar hay una **cuenta atrás visual**: el sonido no sorprende.
3. **El sonido lo dispara él**, con un botón grande, y lo corta cuando quiera. Mientras suena, Lúa se queda quieta y callada.
4. Al pedir pausa, el sonido baja despacio y la pantalla propone la estrategia de calma.
5. Al cerrar, usted registra cómo respondió y si aplicaron la estrategia.

POR QUÉ «INTENSIDAD» Y NO DECIBELIOS

La app no mide el sonido que sale del altavoz: eso depende del teléfono, de su altavoz y de dónde esté puesto. Poner una cifra en decibelios sería inventarla. Los cinco niveles son una escala **relativa**, que ajusta usted con el oído puesto en la sala. La app nunca la sube sola.

Y SI...

- **Para a los dos segundos:** la sesión se cierra igual, se registra «ha pedido pausa» y suma progreso. Eso es información clínica, no un fracaso.
- **Sale de la pantalla a mitad:** el sonido se apaga solo. Nunca sigue sonando por detrás.
- **El aparato no reproduce sonido (navegador):** la pantalla avisa de que se puede recorrer pero **no vale como exposición**.



Fig. 21 · Lo que prepara el adulto antes de nada.

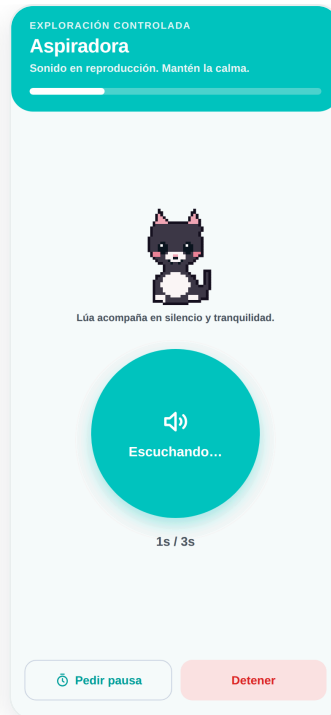


Fig. 22 · El botón es del niño.

La Pizarra Mágica

CÓMO SE USA Trazar la b y la d sin invertirlas

No es caligrafía. Trabaja el **orden y la dirección** del trazo, que es lo que separa la *b* de la *d*: son el mismo dibujo girado.

1. En **Ejercicios**, tocar **Grafomotricidad**, junto a Dislexia. No pide PIN.
2. Elegir pestaña. Con un niño que empieza, **Lazos** antes que **Letras críticas**.
3. Leer la consigna —«el palo baja primero, y luego la barriga a la derecha»— y tocar «**Oír la letra**» si hace falta. Suena el *nombre* de la letra.
4. Trazar sobre el modelo gris con el dedo o un lápiz, pasando por los **puntos numerados en orden**. Cada punto da un toque de vibración.
5. Pulsar «**¡Comprobar trazo!**». Con tres de cada cuatro puntos cubiertos, Lúa lo celebra.

Y SI...

- **Dice «¡Casi casi!» y la letra ha salido bien:** la comprobación mira si pasó por los puntos, no si la letra es bonita. Suba el **grosor** del trazo o pídale que pase justo por encima de los círculos.
- **Falla:** no gasta nada. No hay intentos, ni penalización, ni cuenta atrás.
- **Es zurdo y se tapa el modelo:** gire la tableta o suba el grosor.
- **No aparece en los resultados:** correcto. La pizarra **no puntúa**: es práctica, no medida.
- **Está en castellano con otra variedad puesta:** hoy los textos escritos de esta pantalla solo están en castellano. Lo que Lúa *dice* sí suena en galego, euskara e inglés.

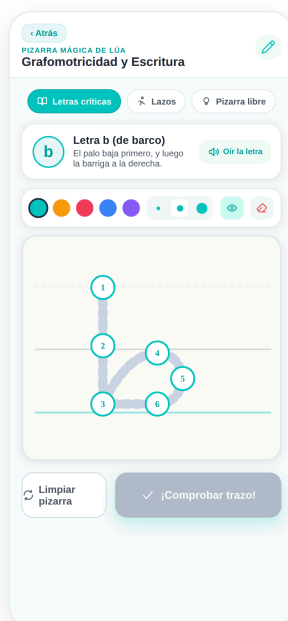


Fig. 23 · Pauta, puntos numerados y flechas.

Realidad Aumentada

Seis ejercicios que usan la cámara frontal como sensor de movimiento. **Solo en teléfono Android con la app instalada:** no aparece en tablet, ni en el navegador. No lleva capturas en este manual a propósito: cualquier captura fiel mostraría la cara de un menor.

ANTES DE NADA Permiso y prueba del teléfono

1. Abrir la tarjeta **Realidad Aumentada**. Si el teléfono no da, la app lo dice y no ofrece nada más.
2. Leer «**Qué hace la cámara en estos juegos**» y aceptar. Se pide **una vez por paciente**.
3. Hacer el **calentamiento de minuto y medio** con Lúa. Mide lo que ese teléfono concreto puede sostener.
4. **Apoyar el teléfono** —en un libro, una caja o contra la pared—, horizontal y a 30-35 cm de la cara. La app avisa en verde cuando la posición vale. Nunca en la mano.

Y SI...

- **El ejercicio se cierra solo:** la cámara ha dejado de ver la cara. Apoye mejor el teléfono.
- **El teléfono se mueve:** la app anula ese intento. Un intento anulado es barato; uno contaminado estropea el registro.
- **El aparato se calienta:** la app avisa. Pare y vuelva otro día.
- **No aparece el bloque:** con el nivel más bajo de la prueba, la app no lo ofrece. Los otros nueve funcionan igual.

Ejercicio	Qué hace el niño
AR-1 · La boquita de beso	Pone boquita de beso y el coche avanza mientras la sostiene. Si una comisura tira mucho más que la otra, no cuenta: esa compensación es justo lo que se intenta deshacer.
AR-2 · ¿De dónde viene?	Suena algo por un lado y él gira la cabeza. Uno de cada cinco intentos no suena : es el control que distingue oír de girarse porque sí.
AR-3 · Elegir mirando	Sostiene la mirada en un dibujo hasta que un anillo se cierra. Necesita una calibración de cinco puntos , obligatoria por niño y por teléfono.
AR-4 · Encontrar a Lúa	Lúa se esconde a un lado y él la busca girando la cabeza, guiado por una retícula.
AR-5 · Lanzarle el pez	Desliza el dedo hacia Lúa. Un toque sin arrastrar no cuenta: sin dirección no hay puntería que medir.
AR-6 · El espejo	Imita la praxia que hace Lúa y la sostiene. Inflar un carrillo más que el otro no se penaliza: es normal.

EN AR-2, NADA DE ALTAVOZ BLUETOOTH

Añade un retraso variable de 100 a 300 milisegundos, que es exactamente lo que ese ejercicio quiere medir. La app lo detecta y guarda el intento sin tiempo. El ejercicio sigue funcionando como juego, y el registro dice por qué no lleva tiempo.

CAPÍTULO 5

Prescribir, ajustar y exportar

Este capítulo es para el logopeda. Todo lo de aquí pide el **PIN**.

1. Abrir el bloque: **Audición, Lenguaje, TEA, Dislexia, Pares Mínimos, Expansión Semántica o Integración Sensorial**.
2. Pulsar «**Desbloquear Edición Profesional**» e introducir el PIN.
3. Encender o apagar cada ejercicio con su interruptor. El contador «N prescritos» se actualiza al momento.
4. Pulsar «**Guardar Prescripción**». Se guarda y la edición se bloquea sola: vuelve al modo Familia.

En modo Familia lo retirado sale atenuado, con candado y el rótulo «**No prescrita**», y no se abre. El mismo PIN vale para los siete bloques.

Y SI...

- **El PIN es incorrecto:** los puntos se marcan en rojo y se puede repetir.
- **Solo quiere mirar:** sin PIN se ve la lista, con los interruptores atenuados. El botón ► de cada fila arranca ese ejercicio igual, también en modo Familia.
- **Va a usar TEA-2 (quiebre pragmático):** exige aceptar antes un encuadre de consentimiento informado. Hasta entonces queda bloqueado.



Fig. 24 · El PIN, el mismo en todos los bloques.

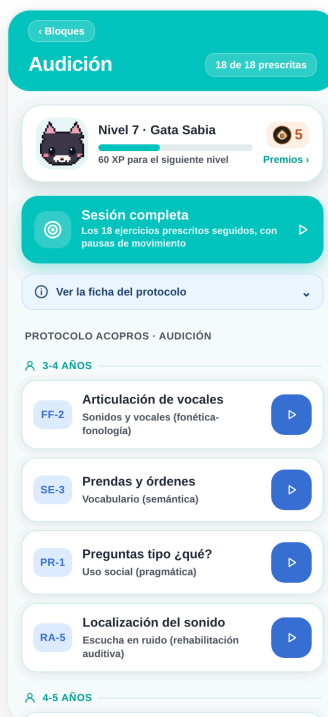


Fig. 25 · Un interruptor por ejercicio.

Es el **Panel del Adulto**. Tres retos que **solo se activan a mano**: la app no los enciende ni los ajusta nunca por su cuenta.

1. Durante el ejercicio, desplegar la tarjeta **«Panel del Adulto»**.
2. Encender lo que quiera: el **ruido de fondo** con su deslizador, la **gata distractora** de doble tarea o el **quiebre pragmático**.
3. Guiar la respuesta del niño y, en el quiebre, marcar la estrategia de reparación que haya observado.
4. Apagarlo cuando convenga. El nivel de reto queda registrado de forma anónima.

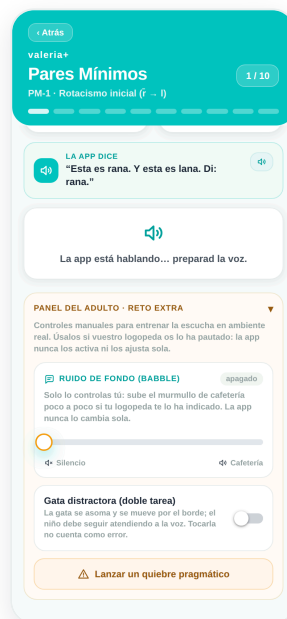


Fig. 26 · Ruido, distractora y quiebre, siempre a mano.

TAREA Ajustar los umbrales de Realidad Aumentada

Logopeda

1. Abrir el **Panel del Adulto** dentro del bloque de RA. Va debajo de los ejercicios, para no hacerlo delante del niño.
2. Ajustar cuánto hay que sostener el gesto en AR-1, la ventana de respuesta de AR-2, el tiempo de fijación de AR-3 y el tipo de puntero.
3. Usar **«Ver las señales en vivo»** antes de una sesión que importe: distancia, grados de giro, apertura de labios y fotogramas por segundo.

EL UMBRAL LO BAJA USTED

Si el niño no lo consigue en varios intentos, el umbral está por encima de lo que hoy puede sostener. **Bájelo usted.** La app nunca lo ajusta sola: si lo hiciera, el registro dejaría de significar nada.

TAREA Exportar los datos del piloto

Logopeda

1. Pestaña **Ajustes** → **«Acceso Profesional»** → introducir el PIN.
2. Aparecen a la vez un **código QR** con el resumen y el **menú de compartir** con el registro completo.
3. **Sin conexión:** escanee el QR con otro móvil.
Con conexión: elija correo o WhatsApp para mandar el registro entero.
4. Tras un envío correcto la app vacía el archivo del aparato y lo confirma.

Y SI...

- **Cancela el compartir:** no se borra nada. El QR sigue ahí y puede reintentarlo.
- **El resumen no cabe en el QR:** la app avisa; use el compartir del registro completo.

Idiomas y voces

Hay **dos ajustes distintos**, y conviene no confundirlos.

Ajuste	Qué cambia
«Voz de la app» Ajustes	Lo que oye el niño y cómo se evalúa: las consignas, las palabras, los bancos de ejercicios.
«Idioma de la aplicación» Ajustes	Los menús que lee usted . Existen en castellano, inglés y catalán.

Por defecto van juntos: cambiar uno arrastra el otro. Si quiere **los menús en un idioma y los ejercicios en otro** —el caso del logopeda con pacientes de varias lenguas—, elija **primero** el idioma de la aplicación y **después** la variedad en «Voz de la app». Esa segunda elección manda y se conserva. Al revés no funciona: el idioma arrastra la variedad y deshace lo elegido.

Las seis variedades

Variedad	Cómo suena y qué tiene de particular
Castellano	Voz neuronal empaquetada en la app: suena natural y funciona sin conexión.
Galego	Voz neuronal propia. Lo que aún no cubre suena con la voz neuronal castellana, en vez de quedarse mudo.
Dominicano	Voz latina del teléfono. Respetar el habla caribeña : no marca como error el seseo, la «s» aspirada ni el cambio de «r» por «l» al final de sílaba.
Euskara	Voz neuronal propia, en batua.
Català	Voz neuronal propia y banco de pares propio , con contrastes que en castellano no existen: <i>caça/casa</i> , <i>peix/pes</i> , <i>os/ós</i> , <i>palla/pala</i> .
English (US) beta	Voz neuronal propia y banco clínico completo. No marca como error los rasgos del inglés afroamericano ni los del hablante bilingüe.

Y SI...

- **En dominicano suena de España o robótica:** instale una voz de «Español (Latinoamérica)» en los ajustes del teléfono. La app la detecta y la usa sola.
- **Prueba el inglés y vuelve:** la app recuerda de dónde venía. Quien estaba en galego vuelve a galego, no a castellano.
- **El micrófono falla más en galego o euskera:** es esperable, y el capítulo 7 explica por qué.

Privacidad: qué se guarda y qué no

La app **funciona entera sin conexión**. La ficha, el historial, la evolución por fonema y el progreso se guardan **cifrados en el propio aparato**. No hace falta cuenta ni internet para usarla.

LA VOZ DEL NIÑO

La app **no guarda, no reproduce y no envía a ningún servidor propio ningún audio** del niño. El sonido se procesa durante el turno de habla y se descarta. Lo único que queda es si acertó o no.

Quien reconoce las palabras es **el servicio del propio teléfono**, y la app le pide siempre que trabaje **sin conexión, dentro del aparato**. Que lo consiga depende del teléfono y del idioma: hace falta que el paquete de ese idioma esté descargado. En castellano es lo normal; en galego y euskera es raro, y ahí el reconocimiento puede pasar por el servicio en línea del sistema, con la política de privacidad de ese servicio, ajena a Valeria+.

La tarjeta «Voz de la app» se lo dice para el idioma que tenga puesto: si se está escuchando dentro del teléfono o a través del servicio del sistema, y por qué. Si lo único que falta es el paquete de idioma, se lo ofrece descargar; si prefiere no hacerlo, los ejercicios funcionan igual.

LA CÁMARA EN REALIDAD AUMENTADA

No se graba ni se guarda ninguna imagen —cada fotograma se analiza y se descarta al instante—, **ningún vídeo sale del teléfono y no se reconoce la cara de nadie**. Lo único que se conserva son números: grados de giro, milisegundos, proporciones y qué dibujo se miró. Mide conducta motora, no identidades. El permiso se pide una vez por paciente y puede retirarse cuando quiera desde los ajustes de Android.

LO QUE RECOGE EL PILOTO CLÍNICO

Métricas **anónimas** de uso: cuánto se tarda en cada pantalla, los toques fuera de sitio, cuántas pausas de movimiento se saltan y cuánto se usan las ayudas de pantalla. **No hay nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas**. Se guardan cifradas y se borran al exportarlas. El consentimiento de las familias se gestiona en el protocolo del piloto, fuera de la app.

Sincronización en la nube: existe un acceso profesional con correo y contraseña para guardar una copia de pacientes y sesiones. Es **opcional**. Si no se activa, todo se queda en el aparato.

Si algo va mal

La sesión

Le pasa esto	Haga esto
El micrófono no reconoce la voz	En el navegador no hay reconocimiento: valore usted con los botones. En la app instalada, revise el permiso de micrófono.
La app oyó mal en Pares Mínimos	Corrójala con «dijo rana / dijo lana». Usted es el juez final y un falso positivo no penaliza al niño.
El micrófono falla más en galego o euskera	Es esperable: hace falta el paquete de idioma instalado en el teléfono, y en esas lenguas es poco frecuente. La tarjeta «Voz de la app» le ofrece descargarlo cuando el aparato lo permite.
No avanza tras la misión física	Es el sello doble: adulto y niño pulsan las dos huellas a la vez. Con una sola mano, mantenga pulsada una huella dos segundos.
No aparece el Test de Ling	Solo sale en Audición, y solo si la ficha indica audífono o implante coclear.
El mismo ejercicio se repetía igual	Use «Otra ronda». Para practicar de una vez todo lo prescrito, «Sesión completa».
Salió ruido de fondo o una gata moviéndose por el borde	Son módulos del Panel del Adulto y solo se activan a mano. Apáguelos desde ese mismo panel.
Apareció una encuesta con caritas	Es la encuesta de satisfacción del piloto. Sale al completar cuatro bloques distintos, como mucho una vez por semana. Puede cerrarla sin responder.

El progreso

Le pasa esto	Haga esto
La racha volvió a cero	Pasó más de un día sin practicar. Active los recordatorios. La mejor racha no se borra y las insignias ganadas se conservan.
No encuentra las insignias	En «Premios >>», en la tarjeta de Lúa. No hace falta PIN.
Las sesiones de la Pizarra Mágica no salen en los resultados	Es correcto: la pizarra no puntúa. Es práctica libre, no una medida.
¿Se pierden los datos al cerrar la app?	No. Todo se guarda cifrado en el aparato.

Permisos y prescripción

Le pasa esto	Haga esto
No puede cambiar qué se practica	Está en modo Familia, que es de solo lectura. Desbloquee el modo Profesional con el PIN.
No recuerda el PIN	Lo define el logopeda. En la demostración es 1985 y es el mismo en todos los bloques.

Idioma y voz

Le pasa esto	Haga esto
En dominicano la voz suena de España o robótica	Instale una voz de «Español (Latinoamérica)» en los ajustes del teléfono. La app la detecta sola.
Marca como error algo que en su país se dice así	En dominicano la app respeta el seseo, la «s» aspirada y la «r/l» final. Y usted siempre puede corregir el veredicto.
En galego algunos ejercicios no hablan	Lo que aún no cubre la voz gallega suena con la castellana, en vez de quedarse mudo.
La Pizarra Mágica está en castellano con otra variedad puesta	Es así hoy: los textos escritos de esa pantalla solo están en castellano. Lo que Lúa dice sí suena en la variedad puesta.

Realidad Aumentada

Le pasa esto	Haga esto
No ve el bloque	Solo aparece en teléfono Android con la app instalada, y solo si la prueba de aptitud lo permite. Los demás bloques funcionan igual.
El ejercicio se cierra solo	La cámara dejó de ver la cara. Apoye el teléfono en un libro o una caja, horizontal y a 30-35 cm. Nunca en la mano.
El coche de AR-1 no arranca	La mueca puede estar saliendo asimétrica, que no cuenta a propósito, o el tiempo de sostén está por encima de lo que hoy aguanta. Bájele usted en el Panel.
En AR-2 no salen los tiempos	Hacen falta altavoces con cable. Con Bluetooth se vetan a propósito. El ejercicio sigue como juego y el registro dice por qué.
En AR-3 la mirada no selecciona	Falta la calibración de cinco puntos, obligatoria por niño y por teléfono. Si el puntero tiembla, cambie a «rayo desde la nariz» en el Panel.
¿Se graba a su hijo?	No. Cada fotograma se analiza dentro del teléfono y se descarta. No hay grabación, no sale ninguna imagen y no se reconoce ninguna cara.

El peluche Lúa

ESTO NO ESTÁ EN LA APP

No hay nada que buscar en los menús, nada que emparejar y nada que comprar. Es un prototipo en desarrollo. Está aquí porque la gata de la app y ese aparato se llaman igual, y conviene saber qué va a hacer y, sobre todo, qué no.

Lúa es también un peluche con una pantalla por cara, conectado por Bluetooth a la app. La idea es pequeña a propósito: **la app decide, Lúa reacciona**. Cuando el adulto da una respuesta por buena, la cara de Lúa lo celebra en la mesa, fuera de la tableta, que es donde el niño está mirando.

Lo que no va a hacer

No hace	Por qué
No escucha	No lleva micrófono, y el firmware no compila si alguien intenta añadir entrada de audio. Un juguete que escucha junto a un menor no entra en una consulta pediátrica.
No habla	Las consignas salen siempre por el altavoz de la tableta, y eso no va a cambiar. Hoy el aparato no suena nada.
No se mueve	Sin motores: nada que pellizque o se rompa en manos de un niño pequeño.
No sabe quién es el niño	El protocolo no tiene ningún campo de texto . No es que la app evite mandar el nombre: es que no existe el sitio donde meterlo.
No decide nada	No mide, no puntúa y no lleva la sesión. Todo lo decide el adulto en la app.

Es la misma gata

No se parecen: **son la misma**. La cara, los dibujos de las fichas y las insignias se dibujan una sola vez en la app y el aparato los copia. Si el niño le pone la flor y la pajarita en el armario, la gata del aparato aparece con la flor y la pajarita. Si la acaricia, ronronea en los dos sitios. Una comprobación automática impide compilar si los dos lados se desvían.

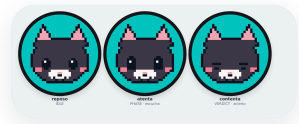


Fig. 27 · Tres caras del panel del aparato, salidas de la misma rejilla de píxeles que dibuja a Lúa en la app.

En qué punto está

La placa redonda existe y la cara de Lúa se ha visto moverse en su pantalla de 32 mm. Sigue siendo **un prototipo sobre una mesa**: no hay peluche, no hay carcasa y no hay unidades. Queda por comprobar que la cara reaccione en menos de tres décimas de segundo desde que el adulto pulsa, que dos dibujos parecidos se distingan en una pantalla tan pequeña y que la vuelta a reposo funcione cien veces de cien cuando se pierde la conexión.

En una valoración auditiva (VIA+) el aparato **no está en la sala**. La protección no es mandarle callar: es que no esté.